


ANLAN

Υπερηχητικός μασάζ προσώπου



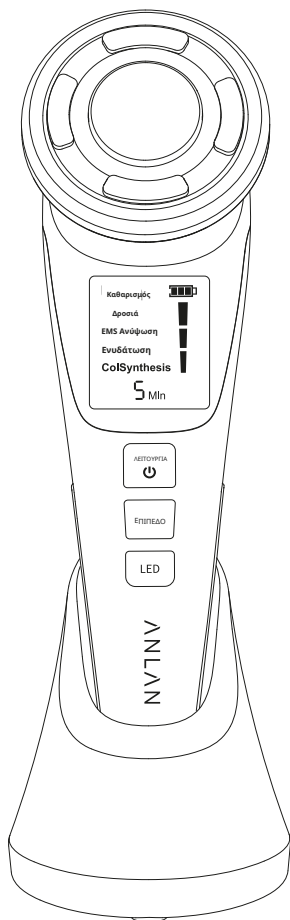


Οδηγίες χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση.

—

Περιγραφή προϊόντος

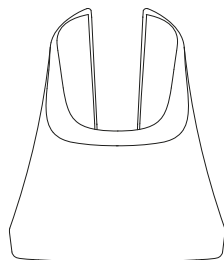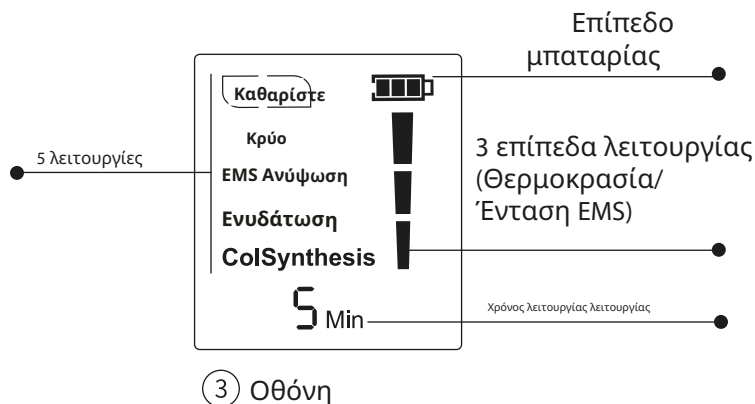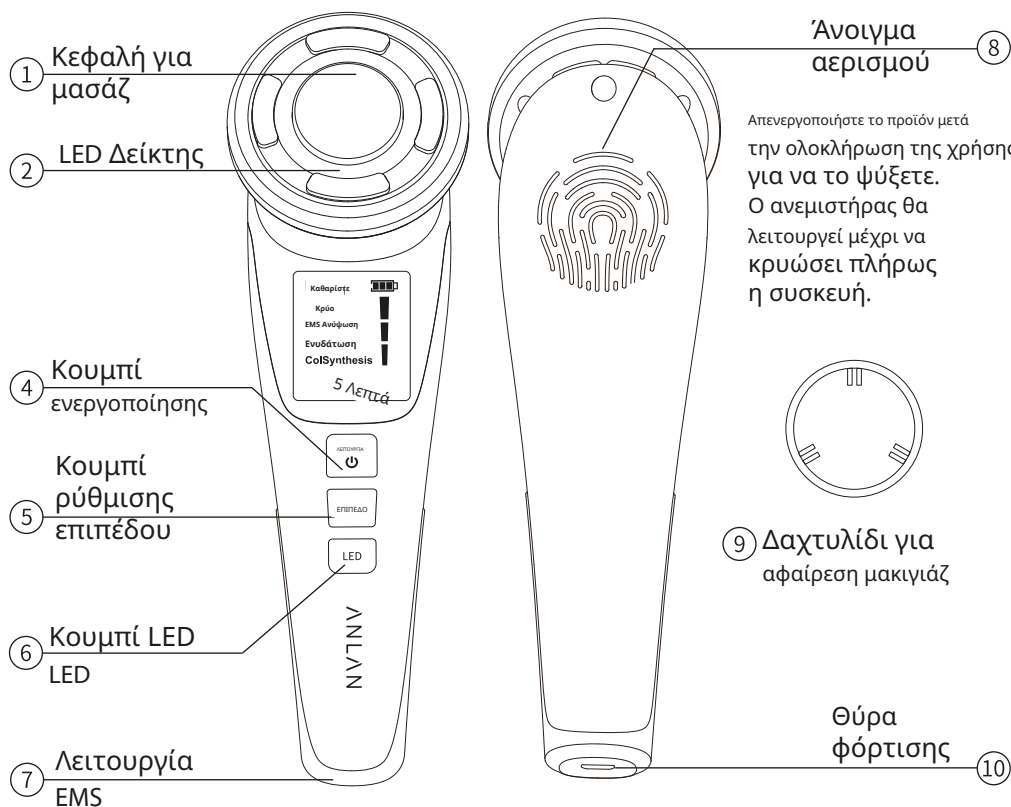


Προδιαγραφές

Όνομα προϊόντος	Υπερηχητικός μασάζ προσώπου
Μοντέλο	A-DRY11
Υλικό	ABS, ανοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις	175 * 55 * 67 χλστ
Βάρος	135 γρ
Χωρητικότητα μπαταρίας	1000 mAh
Διαστάσεις λαβής	80*65 χλστ
Εύρος θερμοκρασίας	38 °C -40 °C -42 °C, 12 °C -8 °C -6 °C
Συχνότητα	10000(+10%) rpm
Χρόνος φόρτισης	3 ώρες


Περιεχόμενα του σετ




1x Μασάζερ

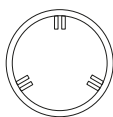

2x Δαχτυλίδι
για αφαίρεση
μακιγιάζ

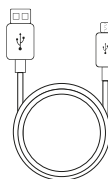

1x Καλώδιο
USB

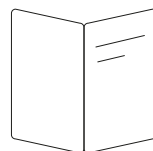


1x Οδηγίες
χρήσης

Προετοιμασία για χρήση




Κατά την πρώτη χρήση, συνιστούμε να δοκιμάσετε τη συσκευή στο χέρι. Πριν από τη χρήση, δοκιμάστε την στο δέρμα με κρέμα ή μάσκα περιποίησης.

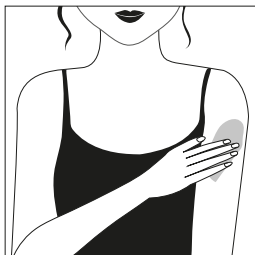

- 1. Πλύνετε το χέρι με σαπούνι και στη συνέχεια στεγνώστε το με πετσέτα.



- 2. Επιλέξτε τη λειτουργία ενυδάτωσης και δοκιμάστε τη συσκευή στο δέρμα.

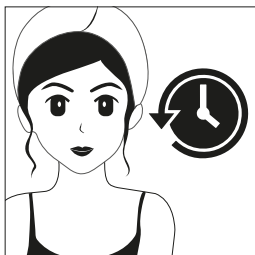

- 3. Εάν μετά από 24 ώρες δεν εμφανιστεί καμία δυσφορία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή.

A

- Πρέπει να αφαιρέσετε εντελώς το μακιγιάζ και να καθαρίσετε το πρόσωπο πριν από τη χρήση.
- Μην κρατάτε τη συσκευή σε ένα σημείο για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα.
- Παρακαλώ προσαρμόστε την κατάλληλη θερμοκρασία στις ανάγκες του δέρματος.
- Να θυμάστε να αγγίζετε το μεταλλικό μέρος του αισθητήρα κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Εάν το δέρμα είναι πολύ ξηρό, η συσκευή δεν θα λειτουργήσει.
- Εάν αισθανθείτε οποιαδήποτε δυσφορία, σταματήστε τη χρήση και επισκεφθείτε έναν γιατρό.

Λειτουργίες

Η λειτουργία φωτισμού LED δεν είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, πρέπει να την ενεργοποιήσετε σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Η αίσθηση των μικρορευμάτων EMS διαφέρει για πολλούς ανθρώπους, είναι φυσιολογικό αν τα αισθάνεστε πολύ δυνατά ή πολύ αδύναμα. Επιλέξτε το κατάλληλο επίπεδο για εσάς. Κρατήστε τη συσκευή για να νιώσετε τους κραδασμούς και το EMS.

Λειτουργία	Χαρακτηριστικό	Συστάσεις	Ποσότητα/χρόνος	Επίπεδο
Καθαρισμός	Ζεστή κομπρέσα Ιόντα + μπλε/κόκκινο φως	Πριν από τη χρήση - αφαιρέστε το μακιγιάζ.	3 φορές την εβδομάδα.	Θερμοκρασία: (38-40 - -42°C)
Ψύξη	Κρύα κομπρέσα Μπλε/κόκκινο φως	Χρησιμοποίησε βάλαμο, γάλα, κρέμα κ.λπ.	Κάθε μέρα	Θερμοκρασία: 3 (6-8-12°C)
EMS lifting	EMS Μπλε/κόκκινο φως	Χρησιμοποίησε βάλαμο, γάλα, κρέμα κ.λπ.	Κάθε μέρα	Θερμοκρασία:
Ενυδάτωση	EMS / Ζεστή κομπρέσα Ιόντα + μπλε/κόκκινο φως	Χρησιμοποίησε βάλαμο, γάλα, κρέμα κ.λπ.	Κάθε μέρα	Θερμοκρασία: 3 (38-40 - -42 °C) Ιόντα: 3 επίπεδο
Σύνθεση Col	EMS/ Κρύα κομπρέσα Ιόντα + μπλε/κόκκινο φως	Χρησιμοποίησε βάλαμο, γάλα, κρέμα κ.λπ.	Κάθε μέρα	Θερμοκρασία: 3 (6-8 - -12 °C) Ιόντα: 3 επίπεδο


Συναρμολόγηση δακτυλίου

Θυμήσου να χρησιμοποιείς καλλυντικά διαλυτά στο νερό. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείς έλαια, κρέμες ή απολεπιστικά τζελ.


Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη, δεν πρέπει να πλένεται.

Παρακαλούμε μην ρίχνετε υπερβολική ποσότητα υγρού ντεμακιγιάζ για να αποφύγετε υπερχειλίση και βλάβη της συσκευής.


Μετά την ολοκλήρωση της χρήσης, πρέπει πάντα να σκουπίζετε την μεταλλική επιφάνεια για να αποφύγετε την εμφάνιση λεκέδων.

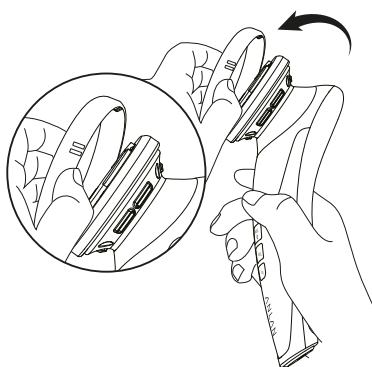


1 Αφαιρέστε το δαχτυλίδι.

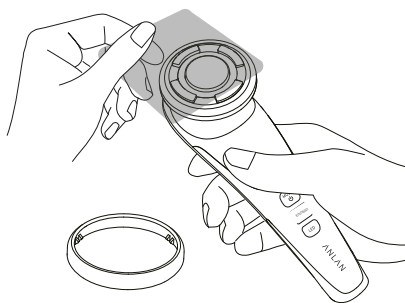

2 Τοποθετήστε ένα βαμβακερό δίσκο στην κεφαλή του μασάζ.

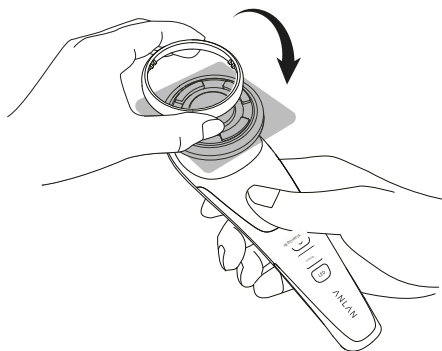

3 Τοποθετήστε το δαχτυλίδι.


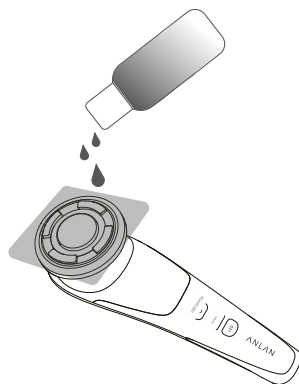


4 Εφαρμόστε τονωτικό σε βαμβακερό δίσκο.

Οδηγίες χρήσης

- ※ Δεν χρειάζεται να τηρείτε τη σειρά των λειτουργιών. Χρησιμοποιήστε τις σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις.
- ※ Οι τρόποι περιποίησης του δέρματος συνιστάται να χρησιμοποιούνται για περίπου 15 λεπτά την ημέρα.

- 1 Πλύνετε το πρόσωπό σας με καθαριστικό προσώπου και στεγνώστε το.
- 2 Εφαρμόστε μάσκα/τονωτικό/λοσιόν/ορό κλπ.

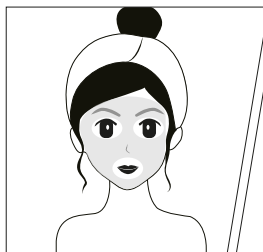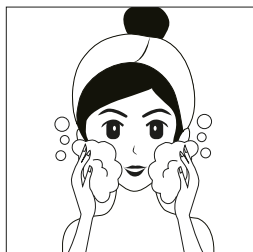

- 3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ




 Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία περιποίησης δέρματος.

ΕΠΙΠΕΔΟ

 Επιλέξτε την προτιμώμενη φωτεινότητα.
(Θεραπεία με κόκκινο/μπλε φως)

LED

 Πατήστε το κουμπί ξανά για να επιλέξετε λειτουργία 1-3.

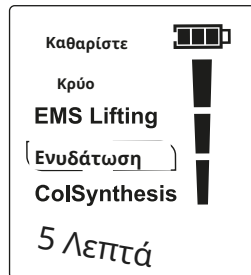

- 4 Αργά μετακινήστε τη συσκευή για να κάνετε μασάζ στο πρόσωπο μετά την εφαρμογή προϊόντων περιποίησης δέρματος.
※ Κρατήστε το καλώδιο σύνδεσης στη συσκευή για να διατηρήσετε τις δονήσεις.



4 Από το σαγόι μέχρι το μάγουλο



Καθαρισμός και συντήρηση

- Μετά την ολοκλήρωση της χρήσης, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
- Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη, μην την πλένετε απευθείας με νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή βενζίνη.
- Η συσκευή πρέπει να σκουπίζεται με μαλακή πανί / χαρτοπετσέτα.
- Μην βάζετε τη θήκη στη φωτιά ή μην την θερμαί-νετε. Μην αφήνετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Κανείς εκτός από τον υπάλληλο της υπηρεσίας δεν πρέπει να αποσυναρμολογεί, να επισκευάζει ή να τροποποιεί τη συσκευή.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε υγρό μέρος, όπως το μπάνιο.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος, μακριά από τα παιδιά.
- Πρέπει να τηρούνται τα παραπάνω μέτρα προφύλαξης και προειδοποιήσεις.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σωματικές βλάβες, κακή λειτουργία, ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση, αποσυναρμολόγηση, τροποποιήσεις, επισκευές κ.λπ.

Συχνές Ερωτήσεις

E: Η συσκευή δόνησε ξανά μετά την απενεργοποίηση.

O: Μετά τη χρήση, η συσκευή παραμένει ζεστή στο εσωτερικό, οπότε ακόμη και μετά την απενεργοποίηση, ο αερισμός θα λειτουργεί για 30 δευτερόλεπτα για να ψύξει τη συσκευή.

P: Η κεφαλή δεν δονείται.

O: ① Πιάστε το καλώδιο σύνδεσης από την πλευρά της συσκευής και ελαφρώς τοποθετήστε την επάνω πλευρά της συσκευής στο δέρμα. (Εάν η κεφαλή είναι αποκομμένη από το δέρμα, η συσκευή δεν θα δονείται.

② Πάντα να ενυδατώνετε το δέρμα με κρέμα ή ορό. Εάν το δέρμα είναι πολύ ξηρό, η μετάδοση των δονήσεων και του EMS θα διαταραχθεί, γεγονός που μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της δράσης και να προκαλέσει δερματικά προβλήματα.

E: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συσκευή μετά την αφαίρεση του δακτυλίου ; Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συσκευή με τον δακτύλιο;

A: Με το βαμβάκι και τον δακτύλιο πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τη λειτουργία CLEAN.

Σε λειτουργίες άλλες από την CLEAN, πρέπει να αφαιρέσετε τον βαμβακερό δακτύλιο.

E: Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη συσκευή για κάτι άλλο εκτός από το πρόσωπο (σώμα, κ.λπ.);

A: Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για το πρόσωπο.

E: Δεν είναι πιο αποτελεσματικό να πιέζω δυνατά;

A: Δεν υπάρχει ανάγκη να πιέζετε δυνατά. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή απαλά για να μην καταπονήσετε το δέρμα.

E: Μπορώ να το χρησιμοποιήσω με μακιγιάζ;

A: Μόνο στη λειτουργία καθαρισμού. Κατά τη διάρκεια της χρήσης άλλων λειτουργιών, πλύνε το πρόσωπό σου, αφάιρεσε το μακιγιάζ, το σμήγμα κ.λπ. για να καθαρίσεις το δέρμα πριν από τη χρήση.

E: Κατά τη διάρκεια της χρήσης νιώθω μούδιασμα στα χέρια, είναι εντάξει;

A: Πρέπει να στεγνώσεις τα χέρια σου πριν από τη χρήση. Δεδομένου ότι η συσκευή λειτουργεί με χαμηλή τάση, το ρεύμα περνά επίσης από το χέρι, δημιουργώντας κύκλωμα. Ωστόσο, πρόκειται για πολύ μικρό ηλεκτρικό ρεύμα, οπότε δεν προκαλεί καμία παρενέργεια για την υγεία.

E: Ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος χρήσης; Μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά;

Οι τρόποι περιποίησης δέρματος μπορούν να χρησιμοποιούνται καθημερινά. Οι τρόποι καθαρισμού συνιστώνται να χρησιμοποιούνται 3 φορές την εβδομάδα. Συνιστούμε να το χρησιμοποιείτε 15-20 λεπτά την ημέρα. Ωστόσο, οι ατομικές αντοχές διαφέρουν, γι' αυτό θα πρέπει να μειώσετε ή να αυξήσετε τον χρόνο χρήσης ανάλογα με την κατάσταση.

E: Έχω ακμή και φλεγμονές στο δέρμα, μπορώ να το χρησιμοποιήσω;

A: Δεδομένου ότι το δέρμα είναι ευαίσθητο κατά τη διάρκεια φλεγμονών ή ακμής, θα πρέπει να αποφεύγονται οι ευαίσθητες περιοχές.

Η υπερβολική χρήση μπορεί να επιβαρύνει το δέρμα, γι' αυτό πρέπει να αποφεύγεται η καθημερινή χρήση όλων των λειτουργιών.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Gyártó
Shenzhen ANLAN Life Technology Co., Ltd.
2204.Bldg.4, Cloud Park Phase 2, BanTianSt./
518129 Longgang, Shenzhen, Guangdong
Kína
support@anlan.com

Az EU-ban felelős szervezet
LTI Testing & Certification France S.A.S.
Rue de Rome 154
13006 Marseille
Franciaország
info@lti-lab.com

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινιλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την παρουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο προϊόν:

- Χρησιμοποιείτε τις συσκευές μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό τους, αποφεύγοντας τη χρήση στο σώμα σε αντίθεση με τις οδηγίες.
- Οι μη αδιάβροχες συσκευές δεν πρέπει να βυθίζονται στο νερό ή να χρησιμοποιούνται σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.
- Μην εκθέτετε τα προϊόντα σε ακραίες θερμοκρασίες και μην τα αφήνετε στον ήλιο για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Για συσκευές που λειτουργούν με μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι η φόρτιση πραγματοποιείται μόνο με το παρεχόμενο καλώδιο ή τον συμβατό προσαρμογέα.

Κίνδυνος για τον χρήστη:

- Αποφύγετε τη χρήση των συσκευών σε ερεθισμένο, κατεστραμμένο δέρμα, ανοιχτές πληγές, ενεργές φλεγμονές ή αλλεργικές αντιδράσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε συσκευές που εκπέμπουν μικρορεύματα, υπερήχους ή θερμότητα εάν έχετε βηματοδότη, μεταλλικά εμφυτεύματα ή είστε έγκυος.
- Εάν εμφανίσετε ευαισθητοποίηση, δυσφορία ή άλλα ανησυχητικά συμπτώματα, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής και συμβουλευτείτε δερματολόγο.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

- Πριν από τη χρήση συσκευών όπως συσκευές μασάζ ή σκούπες μουστάκι, καθαρίστε καλά το πρόσωπό σας και εφαρμόστε κατάλληλα καλλυντικά (π.χ. τζελ ή νερό) για να υποστηρίξετε τη θεραπεία.
- Οι συσκευές βαθύ καθαρισμού, όπως οι συσκευές απολέπισης με σπτηλαίωση, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται το πολύ 2-3 φορές την εβδομάδα για να αποφεύγεται ο υπερβολικός ερεθισμός του δέρματος.
- Χρησιμοποιείτε τις συσκευές σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, χωρίς να υπερβαίνετε τη συνιστώμενη διάρκεια δράσης σε μία περιοχή του προσώπου (συνήθως 1-2 λεπτά).
- Επιλέξτε το κατάλληλο επίπεδο έντασης, ειδικά αν έχετε ευαίσθητο δέρμα.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Μετά από κάθε χρήση, καθαρίζετε τη συσκευή με ένα υγρό πανί ή άλλο εργαλείο σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Για τις αδιάβροχες συσκευές, μπορείτε να τις ξεπλύνετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των αξεσουάρ, όπως οι άκρες απολέπισης ή βούρτσας, και αντικαταστήστε τα σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
- Αποθηκεύετε τις συσκευές σας σε στεγνό, καθαρό μέρος, αποφεύγοντας την επαφή με την υγρασία και τη σκόνη.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Προσαρμογή στον χρήστη:

- Επιλέξτε τη σωστή συσκευή για τον τύπο του δέρματός σας και τις ατομικές σας ανάγκες. Λειτουργίες όπως η θέρμανση ή το μασάζ με μικρορεύματα ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για ευαίσθητο ή αγγειακό δέρμα.
- Η χρήση των συσκευών από άτομα με δερματολογικά προβλήματα, όπως η ροδόχρου ακμή, θα πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση με γιατρό.
- Ζημιές και εξυπηρέτηση:
 - Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε βλάβη στη συσκευή (π.χ. ρωγμές στο περίβλημα, προβλήματα με την ενεργοποίηση, ασταθή λειτουργία), διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή.
 - Για την αντικατάσταση εξαρτημάτων και αξεσουάρ χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
 - Ελέγχετε τακτικά τη λειτουργία των επαναφορτιζόμενων συσκευών και φορτίζετε τις συσκευές σύμφωνα με τις συστάσεις για να αποφύγετε την υποβάθμιση της απόδοσης ή τον κίνδυνο ζημιάς.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ασφάλεια λειτουργίας, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ανθεκτικότητα των υλικών.

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου-ιόντων (Li-Ion)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Όχι
Καθαρό βάρος (kg)	0.01790
Χωρητικότητα (mAh)	1000