


ANLAN

Πολυλειτουργική συσκευή περιποίησης δέρματος

Οδηγίες χρήσης

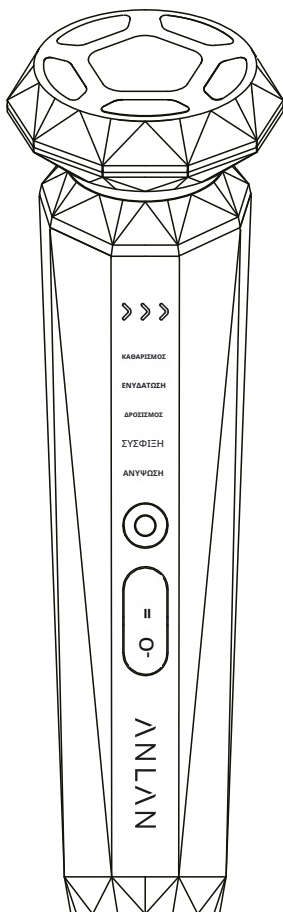

* Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν ANLAN.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την αποφυγή πιθανών τραυματισμών χρηστών και ζημιών σε περιουσία λόγω ακατάλληλης χρήσης, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και ακολουθήστε τις.

 Προειδοποίηση	Υποδεικνύει δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.
 Κανόνες ασφαλείας	Υποδεικνύει δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή ζημιές σε περιουσία.
 Κανόνες ασφαλείας	Μη χρησιμοποιείτε στις ακόλουθες περιοχές: • Δέρμα με δερματικές παθήσεις και ατοπική δερματίτιδα • Δέρμα με ουλές, έκζεμα, εξανθήματα κ.ά. • Περιοχές με δερματικές διαταραχές, όπως δερματίτιδα ή υπερβολική ηλιακή έκθεση. • Περιοχές όπου η αποτρίχωση πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα με τη χρήση της συσκευής.

ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ



Συσκευή * 1



Δακτύλιος στερέωσης * 2



Καλώδιο * 1



Οδηγίες χρήσης * 1



Καλλυντικό βαμβάκι * 1 συσκευασία (15 τεμάχια/συσκευασία)



Σύνθετο κουτί αποθήκευσης * 1




Πανί καθαρισμού * 1

* Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι ένας από τους δύο δακτύλιους στερέωσης βρίσκεται ήδη στην κεφαλή της κύριας συσκευής.

Λυπούμαστε, δεν θα λάβετε ειδοποίηση σε περίπτωση που γίνουν μελλοντικές τροποποιήσεις στη συσκευή ή στα αξεσουάρ για βελτίωση.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

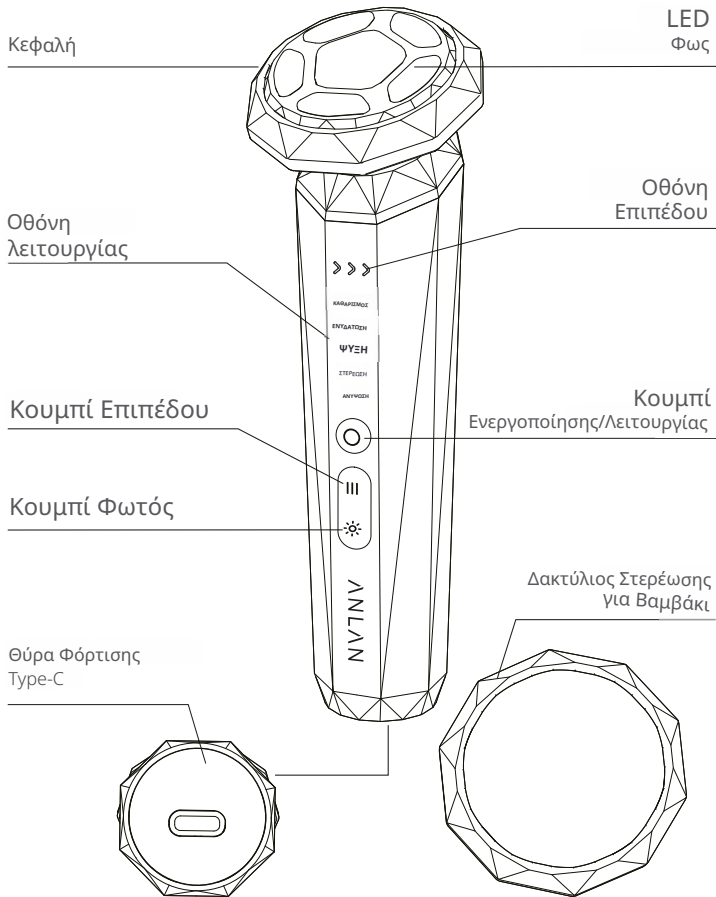

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όνομα Προϊόντος	Πολυλειτουργική συσκευή περιποίησης δέρματος
Μοντέλο	01-ADRY14-10A
Διαστάσεις	Περίπου 170 × 52 × 49 mm
Βάρος	Περίπου 180 g
Υλικό	ABS
Συχνότητα RF	F=2 MHZ
Μήκος κύματος φωτός	Περίπου Κόκκινο 621 nm, Μπλε 461 nm
Στροφές κινητήρα δονήσεων (RPM)	Περίπου 14.000 RPM
Ρύθμιση θερμοκρασίας	Περίπου Ζεστό 38-40-42 °C Περίπου Ψυχρό 18 - 14 - 12 °C
Υποδοχή φόρτισης	Φόρτιση Type-C
Χωρητικότητα μπαταρίας	1600mAh
Χρόνος λειτουργίας	Περίπου 90 λεπτά
Χρόνος φόρτισης	Περίπου 150 λεπτά
Είσοδος	DC 5V= 2A
Εγγύηση	1 Έτος


* Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες και το περιβάλλον χρήσης.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ


Παρακαλείσθε να πραγματοποιήσετε δοκιμή στο δέρμα:

Εκτελέστε τη δοκιμή με τα προϊόντα περιποίησης δέρματος που χρησιμοποιείτε συνήθως, για να βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή, προλαμβάνοντας ενδεχόμενες αλλεργίες.

* Παρακαλείσθε να πραγματοποιήσετε δοκιμή στο δέρμα ώστε να αποφύγετε τυχόν προβλήματα.

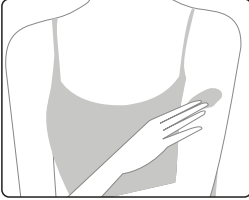


1. Πλύνετε το εσωτερικό μέρος του βραχίονα με σαπούνι, εφαρμόστε το βάλασμό σας στο δέρμα του βραχίονα σε μέγεθος παρόμοιο με το κεφάλι μασάζ της συσκευής.

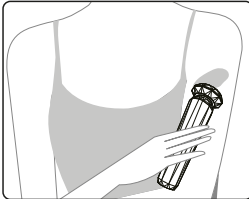

2. Επιλέξτε τη λειτουργία ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ και χρησιμοποιήστε τη συσκευή για μασάζ του δέρματος προς δοκιμή. (περίπου 1 λεπτό)


- ① Μετακινήστε τη συσκευή ώστε να πραγματοποιεί κυκλικές κινήσεις στην περιοχή του δέρματος. (Μασάζ για 10 δευτερόλεπτα)
- ② Απομακρύνετε τη συσκευή από το δέρμα, σταματήστε για 5 δευτερόλεπτα και επαναλάβετε το μασάζ για 10 δευτερόλεπτα.
- ③ Επαναλάβετε τρεις φορές και στη συνέχεια περιμένετε να στεγνώσει η δοκιμαζόμενη περιοχή δέρματος.

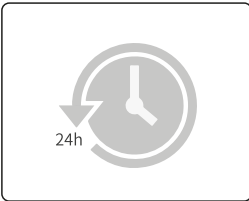

3. Περιμένετε 24 ώρες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφόσον, σύμφωνα με το παραπάνω τεστ στο δέρμα, δεν εμφανιστούν ανωμαλίες.

* Εάν το αποτέλεσμα του τεστ στο δέρμα είναι μη φυσιολογικό (έντονος κνησμός, πόνος κ.ά.), ενδέχεται να υπάρχει ασυμβατότητα με αυτό το προϊόν. Παρακαλούμε διακόψτε τη χρήση.

Οθόνη LED (κατά την ενεργοποίηση):

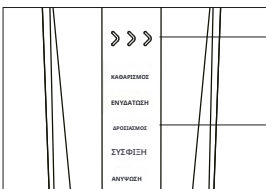

3 Επίπεδα

5 Λειτουργίες

- Πατώντας το κουμπί λειτουργίας/λειτουργίας Ο για 1,5 δευτερόλεπτο, ενεργοποιείται η συσκευή.


(Η προεπιλεγμένη λειτουργία κατά την ενεργοποίηση είναι η λειτουργία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.)

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ


Παρακαλείσθε να πραγματοποιήσετε δοκιμή στο δέρμα:

Εκτελέστε τη δοκιμή με τα προϊόντα περιποίησης δέρματος που χρησιμοποιείτε συνήθως, για να βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή, προλαμβάνοντας ενδεχόμενες αλλεργίες.


* Παρακαλείσθε να πραγματοποιήσετε δοκιμή στο δέρμα ώστε να αποφύγετε τυχόν προβλήματα.

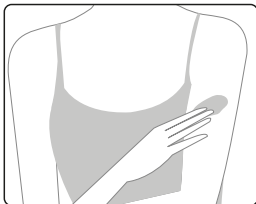

1. Πλύνετε το εσωτερικό μέρος του βραχίονα με σαπούνι, εφαρμόστε το βάλασμό σας στο δέρμα του βραχίονα σε μέγεθος παρόμοιο με το κεφάλι μασάζ της συσκευής.

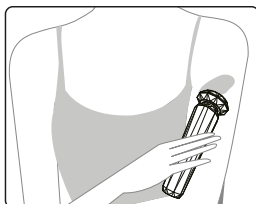


2. Επιλέξτε τη λειτουργία ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ και χρησιμοποιήστε τη συσκευή για μασάζ του δέρματος προς δοκιμή. (περίπου 1 λεπτό)
 - ① Μετακινήστε τη συσκευή ώστε να πραγματοποιεί κυκλικές κινήσεις στην περιοχή του δέρματος. (Μασάζ για 10 δευτερόλεπτα)
 - ② Απομακρύνετε τη συσκευή από το δέρμα, σταματήστε για 5 δευτερόλεπτα και επαναλάβετε το μασάζ για 10 δευτερόλεπτα.
 - ③ Επαναλάβετε τρεις φορές και στη συνέχεια περιμένετε να στεγνώσει η δοκιμαζόμενη περιοχή δέρματος.

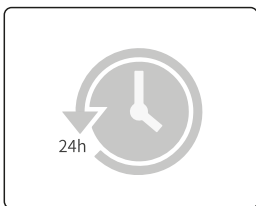

3. Περιμένετε 24 ώρες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφόσον, σύμφωνα με το παραπάνω τεστ στο δέρμα, δεν εμφανιστούν ανωμαλίες.

* Εάν το αποτέλεσμα του τεστ στο δέρμα είναι μη φυσιολογικό (έντονος κνησμός, πόνος κ.ά.), ενδέχεται να υπάρχει ασυμβατότητα με αυτό το προϊόν. Παρακαλούμε διακόψτε τη χρήση.

Οθόνη LED (κατά την ενεργοποίηση):

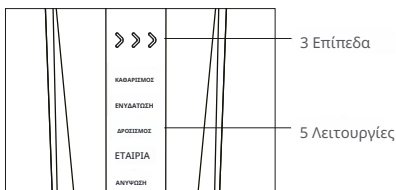

- Πατώντας το κουμπί λειτουργίας/λειτουργίας Ο για 1,5 δευτερόλεπτο, ενεργοποιείται η συσκευή.
(Η προεπιλεγμένη λειτουργία κατά την ενεργοποίηση είναι η λειτουργία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.)

Πώς να αλλάξετε λειτουργίες

- Με την ενεργοποίηση της συσκευής, η πίεση του κουμπιού λειτουργίας/λειτουργίας επιτρέπει την αλλαγή της λειτουργίας ως εξής:



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ → ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ → ΨΥΞΗ → ΣΚΟΥΡΥΝΣΗ → ΣΥΣΦΙΞΗ. Κατά την εναλλαγή στη

- ※ λειτουργία «ΣΚΟΥΡΥΝΣΗ» ή «ΣΥΣΦΙΞΗ», ο ηχητικός προειδοποιητικός τόνος συνοδεύεται από ήχο κλικ, ο οποίος δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Πώς να αλλάξετε επίπεδα


||| Με ενεργοποιημένη τη συσκευή, ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού επιπέδου αλλάζει το επίπεδο.

Επίπεδο 1 → Επίπεδο 2 → Επίπεδο 3 → Επίπεδο 1.

- * Μπορείτε να ρυθμίσετε τα επίπεδα θέρμανσης, ψύξης, εισαγωγής ιόντων, εξαγωγής ιόντων, λειτουργίας EMS, δόνησης και RF για διάφορες λειτουργίες.

Πώς να αλλάξετε τα φώτα

- ☀ Μετά την ενεργοποίηση, ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού φωτισμού αλλάζει το φως:

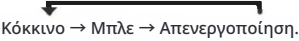

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


Λειτουργίες	Συνδυασμός λειτουργιών	Σύσταση	Συχνότητα χρήσης	Χρονοδιακόπτης
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	Θέρμανση Εξαγωγή ιόντων Δό-δονητική Κόκκινο / μπλε φως	Βαμβάκι καλλυντικό Απο-Καθαριστικό μακιγιάζ	Καθημερινά 5 λεπτά	5 λεπτά
ΕΝΥΔΑ-ΤΩΣΗ	Εισαγωγή Ιόντων Δόνηση > Κόκκινο / Μπλε φως	Τονωτική λο-σιόν, βάλαμο Μάσκα, ορός	Καθημερινά 5 λεπτά	5 λεπτά
ΨΥΞΗ	ΨΥΞΗ Φως-Κόκκινο / Μπλε φως	Τονωτική λοσιόν, βάλαμο Μάσκα, ορός	Καθημερινά 5 λεπτά	3 λεπτά
ΜΑΓΕΙΑ	RF Φως Κόκκινο / Μπλε	Τονωτική λοσιόν, βάλαμο Μάσκα, ορός	2 – 3 Φορές / εβδομάδα 5 λεπτά	5 λεπτά
ΣΥ-ΣΦΙΞΗ	Μικρορεύμα EMS Φως κόκκινο / μπλε	Τονωτική λοσιόν, βάλαμο Μάσκα, ορός	2 – 3 Φορές / εβδομάδα 5 λεπτά	5 λεπτά

- ※ Η προεπιλεγμένη θεραπεία φωτός διαφέρει ανάλογα με τις λειτουργίες. Παρακαλείστε να την αλλάξετε σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.


- * Η αίσθηση του μικρορεύματος EMS διαφέρει από άτομο σε άτομο. Είναι φυσιολογικό αν το νιώθετε πολύ έντονα ή πολύ ασθενώς, παρακαλείστε να επιλέξετε τα κατάλληλα επίπεδα.

- * Κατά τη χρήση της συσκευής, τα δαχτυλίδια στερέωσης μπορούν να αφαιρεθούν, εκτός αν χρειάζεστε την ασφάλεια του βαμβακιού.


ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

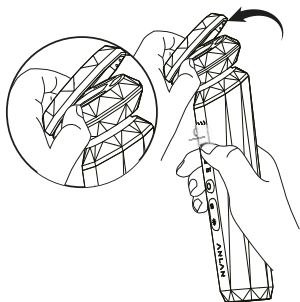


1. Αφαιρέστε το δαχτυλίδι για το κοσμητικό βαμβάκι.

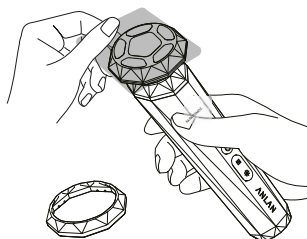

2. Τοποθετήστε το κοσμητικό βαμβάκι για τον καθαρισμό του μακιγιάζ στην κορυφή.

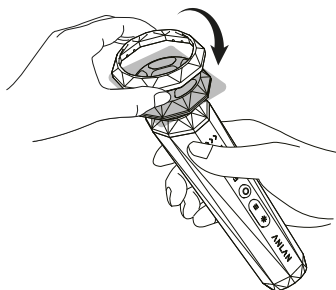

3. Εγκαταστήστε το δακτύλιο για βαμβάκι καλλυντικό.

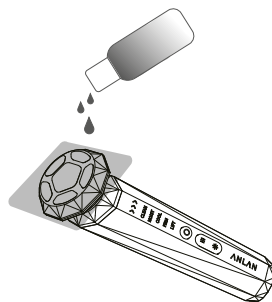

4. Παντίστε το καθαριστικό μακιγιάζ στο βαμβάκι.

* Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε προϊόντα με βάση το λάδι, κρέμες απολέπισης ή απολεπιστικά τζελ.


* Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη, παρακαλούμε να μην την πλένετε.

* Παρακαλούμε να μην εφαρμόζετε υπερβολική ποσότητα καθαριστικού μακιγιάζ, για να αποφύγετε υπερχείλιση που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.


※ Παρακαλούμε να σκουπίζετε και να καθαρίζετε την μεταλλική επιφάνεια μετά από κάθε χρήση, για να αποφύγετε την εμφάνιση επιβλαβών λεκέδων.

Λειτουργία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Πλύνετε το πρόσωπό σας όπως συνήθως.

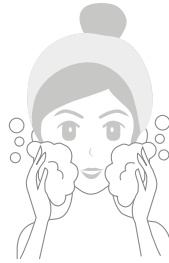

2. Τοποθετήστε βαμβάκι στην κορυφή της συσκευής με το δακτύλιο στερέωσης και ρίξτε καθαριστικό μακιγιάζ πάνω στο βαμβάκι.

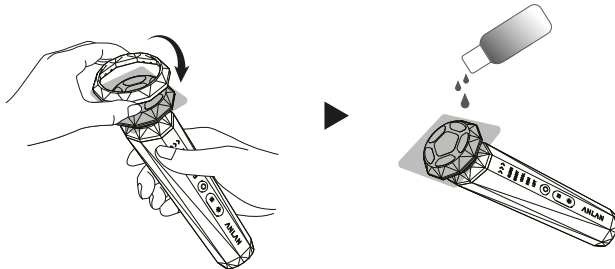

3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/λειτουργίας Ο για να ανοίξετε τη συσκευή. Η λειτουργία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

4. Πατήστε σύντομα το κουμπί επιλογής επιπέδου «III» για να επιλέξετε την κατάλληλη θερμοκρασία για το δέρμα σας. (38 °C - 40 °C - 42 °C) *

Κατά την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι ξεκινάτε από το επίπεδο 1 για να προσαρμοστείτε.

5. Πατήστε σύντομα το κουμπί φωτός για να επιλέξετε κόκκινο ή μπλε φως.

6. Κινήστε αργά τη συσκευή για βαθύ και ακριβή καθαρισμό του προσώπου.

- ① Από τη μύτη προς το μέτωπο.
- 2 Από τη βάση του μετώπου προς τα επάνω.
- 3 Από το κέντρο του προσώπου προς τα έξω.
- Από το πηγούνι προς τα μάγουλα.



7. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας/λειτουργίας Ο για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

✗ Αν κατά τη χρήση δεν αλλάξει η λειτουργία, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά το χρονόμετρο λειτουργίας (5 λεπτά).

8. Αφαιρέστε το βαμβάκι και καθαρίστε όλους τους λεκέδες ή τη βρωμιά από το επάνω μέρος της συσκευής.


* Συνιστάται η χρήση της λειτουργίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 2-3 φορές την εβδομάδα, ανάλογα με την κατάσταση του δέρματος.

Η υπερβολικά συχνή χρήση θα προκαλέσει υπερβολική επιβάρυνση του δέρματος, επομένως παρακαλείσθε να τη χρησιμοποιείτε με την κατάλληλη συχνότητα.

✖ Εάν εμφανιστεί προειδοποίηση υπερθέρμανσης, διακόψτε τη χρήση για τουλάχιστον 10 λεπτά πριν συνεχίσετε με τα επόμενα βήματα.

Λειτουργία ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΨΥΞΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΣΥΣΦΙΞΗ

1. Πλύνετε το πρόσωπο όπως συνήθως με γαλάκτωμα καθαρισμού και εφαρμόστε προϊόντα περιποίησης δέρματος, όπως τονωτική λοσιόν, βάλασμο και μάσκα.

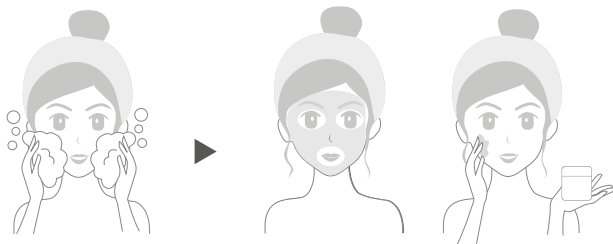

2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης / λειτουργίας Ο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, στη συνέχεια πατήστε σύντομα το ίδιο κουμπί για να επιλέξετε λειτουργία [ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΨΥΞΗ ΜΗ ΣΚΟΡΥΝΣΗ ΣΥΣΦΙΞΗ].

3. Πατήστε σύντομα το κουμπί επιπέδου III για να ρυθμίσετε το επίπεδο κατάλληλα για τον τύπο του δέρματός σας. (ΨΥΞΗ 18 °C – 16 °C – 14 °C)

* Κατά την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι ξεκινάτε από το επίπεδο 1 για να εξοικειωθείτε με τη συσκευή.

4. Πατήστε σύντομα το κουμπί φωτός ✨ για να επιλέξετε είτε κόκκινο είτε μπλε φως.

5. Κινείτε αργά τη συσκευή για να κάνετε μασάζ στο πρόσωπο για τη φροντίδα του δέρματος.

* Παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε τα δικά σας προϊόντα περιποίησης δέρματος ή τζελ αλόης.

- ① Από τη μύτη προς το μέτωπο.
- ② Από το κάτω μέρος του μετώπου προς τα πάνω
- ③ Από το κέντρο του προσώπου προς τα έξω.
- ④ Από το πηγούνι προς τα μάγουλα



6. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης / λειτουργίας Ο για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

* Εάν δεν αλλάξει η λειτουργία κατά τη χρήση, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα σύμφωνα με το χρονόμετρο λειτουργίας (λειτουργία ΨΥΞΗ: 3 λεπτά, λειτουργίες ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ / ΣΚΟΡΥΝΣΗ / ΣΥΣΦΙΞΗ: 5 λεπτά).

7. Μετά τη χρήση, καθαρίστε τυχόν λεκέδες ή βρωμιά από το επάνω μέρος της συσκευής.

* Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ΨΥΞΗ καθημερινά, η οποία είναι κατάλληλη για χρήση ως τελευταίο βήμα στη φροντίδα του δέρματος.

* Διαφορετικοί τύποι δέρματος έχουν διαφορετικό βαθμό ανεκτικότητας. Συνιστάται η χρήση 2 έως 3 φορές την εβδομάδα για δέρμα με χαμηλό βαθμό ανεκτικότητας. Για δέρμα με υψηλό βαθμό ανεκτικότητας, μπορεί να χρησιμοποιείται καθημερινά.

✖ Εάν εμφανιστεί προειδοποίηση υπερθέρμανσης, διακόψτε τη χρήση για τουλάχιστον 10 λεπτά πριν συνεχίσετε με τα επόμενα βήματα.

8. Αφαιρέστε το βαμβάκι και καθαρίστε όλους τους λεκέδες ή τη βρωμιά από το επάνω μέρος της συσκευής.


* Συνιστάται η χρήση της λειτουργίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 2-3 φορές την εβδομάδα, ανάλογα με την κατάσταση του δέρματος.

Η υπερβολικά συχνή χρήση θα προκαλέσει υπερβολική επιβάρυνση του δέρματος, επομένως παρακαλείσθε να τη χρησιμοποιείτε με την κατάλληλη συχνότητα.

* Εάν εμφανιστεί προειδοποίηση υπερθέρμανσης, διακόψτε τη χρήση για τουλάχιστον 10 λεπτά προτού συνεχίσετε με τα επόμενα βήματα.

Λειτουργία ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΨΥΞΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΣΥΣΦΙΞΗ

1. Πλύνετε το πρόσωπο όπως συνήθως με γαλάκτωμα καθαρισμού και εφαρμόστε προϊόντα περιποίησης δέρματος, όπως τονωτική λοσιόν, βάλασμο και μάσκα.

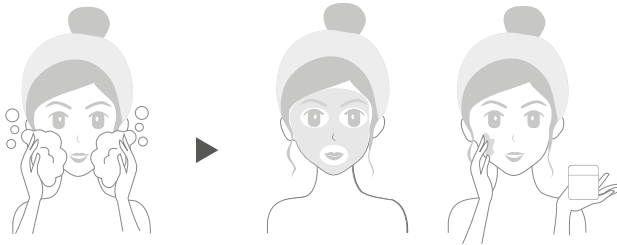

2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης / λειτουργίας Ο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και στη συνέχεια πατήστε σύντομα το ίδιο κουμπί για να επιλέξετε τη λειτουργία [ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΨΥΞΗ ΣΥΣΦΙΞΗ].

3. Πατήστε σύντομα το κουμπί επιπέδου III για να ρυθμίσετε το επίπεδο κατάλληλα για τον τύπο του δέρματός σας, (ΨΥΞΗ 18 °C - 16 °C - 14 °C)

* Κατά την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι ξεκινάτε από το επίπεδο 1 για να εξοικειωθείτε με τη συσκευή.

4. Πατήστε σύντομα το κουμπί φωτός ☀ για να επιλέξετε είτε κόκκινο είτε μπλε φως.

5. Κινείτε αργά τη συσκευή για να κάνετε μασάζ στο πρόσωπο για τη φροντίδα του δέρματος.

* Παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε τα δικά σας προϊόντα περιποίησης δέρματος ή τζελ αλόης.

① Από τη μύτη προς το μέτωπο.

② Από τη βάση του μετώπου προς τα επάνω.

③ Από το εσωτερικό προς τα εξωτερικά μέρη του προσώπου

④ Από το πηγούνι προς τα μάγουλα



6. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης / λειτουργίας Ο για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

* Εάν δεν αλλάξει η λειτουργία κατά τη χρήση, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα σύμφωνα με το χρονόμετρο λειτουργίας (λειτουργία ΨΥΞΗ: 3 λεπτά, λειτουργίες ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ / ΣΚΟΡΥΝΣΗ / ΣΥΣΦΙΞΗ: 5 λεπτά).

7. Μετά τη χρήση, καθαρίστε τυχόν λεκέδες ή βρωμιά από το επάνω μέρος της συσκευής.

* Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ΨΥΞΗ καθημερινά, η οποία είναι κατάλληλη για χρήση ως τελευταίο βήμα στη φροντίδα του δέρματος.

* Διαφορετικοί τύποι δέρματος έχουν διαφορετικό βαθμό ανεκτικότητας. Συνιστάται η χρήση 2 έως 3 φορές την εβδομάδα για δέρμα με χαμηλό βαθμό ανεκτικότητας. Για δέρμα με υψηλό βαθμό ανεκτικότητας, μπορεί να χρησιμοποιείται καθημερινά.

* Εάν εμφανιστεί προειδοποίηση υπερθέρμανσης, διακόψτε τη χρήση για τουλάχιστον 10 λεπτά προτού συνεχίσετε με τα επόμενα βήματα.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Προβλήματα	Πιθανά αίτια	Λύσεις
Δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί	Το κουμπί ενεργοποίησης δεν πατήθηκε για μερικά δευτερόλεπτα.	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης για μερικά δευτερόλεπτα.
Λειτουργεί μόνο για λίγα λεπτά μετά τη φόρτιση	Ανεπαρκής φόρτιση μειωμένη διάρκεια ζωής μπαταρίας Βλάβη προϊόντος	Παρακαλώ φορτίστε πλήρως
		Παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών ANLAN για βοήθεια
Η συσκευή είναι θερμή	Χρήση συνεχόμενα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα	Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ξεκουραστείτε για 10 λεπτά ή περισσότερο.
Στη λειτουργία ΨΥΞΗ δεν δροσίζει	Χρησιμοποιείται σε λανθασμένη θερμοκρασία	Παρακαλώ χρησιμοποιήστε σε περιβάλλον με θερμοκρασία από 15 °C έως 30 °C.
Τα ιόντα / EMS είναι έντονα (πονάει)	Ρυθμίστηκε λανθασμένα υψηλό επίπεδο	Επιλέξτε χαμηλότερο επίπεδο
	Το πάνω μέρος της συσκευής δεν αγγίζει όλο το δέρμα	Βεβαιωθείτε ότι το πάνω μέρος αγγίζει ολόκληρη την επιφάνεια του δέρματος
Τα ιόντα / EMS είναι αδύναμα	Ρυθμισμένο λανθασμένα χαμηλό επίπεδο	Επιλέξτε ανώτερο επίπεδο
Δεν υπάρχει αίσθηση του EMS	Το δέρμα σας είναι πολύ ξηρό, για να μεταφερθεί το EMS	Ευδατώστε το δέρμα σας με βάλσαμο πριν από τη χρήση
	Δεν αγγίζει πλήρως το δέρμα	Αγγίζει πλήρως το δέρμα
Το RF είναι υπερβολικά ζεστό	Το πάνω μέρος της συσκευής παραμένει για πολύ ώρα στο ίδιο σημείο του δέρματος	Μετακινήστε τη συσκευή για να κάnete μασάζ στο δέρμα
	Η κίνηση της συσκευής είναι πολύ αργή	Μετακινήστε τη συσκευή πιο γρήγορα
	Εάν χρησιμοποιείται σε ξηρό δέρμα, χωρίς βαμβάκι ή με πολύ αργή κίνηση της συσκευής, μπορεί να θερμανθεί υπερβολικά	• Μετακινήστε γρήγορα • Χρησιμοποιήστε βαμβάκι με την τουαλετική λασάν • Ευδατώστε το δέρμα
Έλλειψη αίσθησης RF	Το δέρμα σας είναι πολύ ξηρό	Ευδατώστε το δέρμα σας με βάλσαμο πριν από τη χρήση
	Η κίνηση της συσκευής είναι πολύ γρήγορη	Κινηθείτε με τη συσκευή πιο αργά

Ε: Μπορώ να τη χρησιμοποιήσω σε άλλα σημεία εκτός από το πρόσωπο (στο σώμα κ.λπ.);

Α: Μόνο στο πρόσωπο. Μην τη χρησιμοποιείτε σε άλλα σημεία εκτός από το πρόσωπο.

Ε: Μπορώ να τη χρησιμοποιήσω με μακιγιάζ;

Α: Παρακαλούμε μη τη χρησιμοποιείτε με μακιγιάζ. Πλύντε το πρόσωπο πριν από τη χρήση.

Ε: Μπορώ να τη χρησιμοποιήσω στο μπάνιο;

Α: Δεν είναι αδιάβροχη. Παρακαλούμε μην τη χρησιμοποιείτε στο μπάνιο.

Ερ: Δεν είναι πιο αποτελεσματικό να το πιέζω με δύναμη;

Απ: Δεν χρειάζεται να πιέξετε με δύναμη. Κάνετε απαλό μασάζ ώστε να μην επιβαρύνετε το δέρμα.

Ερ: Νιώθω δονήσεις στο χέρι κατά τη χρήση, είναι αυτό φυσιολογικό;

Απ: Παρακαλούμε στεγνώστε καλά τα χέρια σας πριν από τη χρήση. Λειτουργεί με ασθενές ρεύμα, οπότε το ρεύμα περνά επίσης από το χέρι, δημιουργώντας κύκλωμα. Ωστόσο, πρόκειται για πολύ χαμηλό ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς καμία αρνητική επίπτωση για την υγεία.

Ερ: Το βαμβάκι μετά τη χρήση φαίνεται να μην είναι πολύ βρώμικο, είναι αυτό φυσιολογικό;

Απ: Η λειτουργία εκπομπής ιόντων καθαρίζει την αόρατη βρωμιά από τους πόρους, ενώ η ορατή ρύπανση εξαρτάται από το πόσο ρυπαρό είναι το δέρμα.

Ε: Έχω ακμή και φλεγμονή στο δέρμα, μπορώ να το χρησιμοποιήσω;

Α: Εφόσον το δέρμα είναι ευαίσθητο κατά τη διάρκεια της φλεγμονής ή της ακμής, αποφύγετε τις ευαίσθητες περιοχές.

Ε: Πρέπει να αφαιρέσω το στεφάνι στερέωσης για να το χρησιμοποιήσω;

Α: Το στεφάνι στερέωσης χρησιμοποιείται μόνο όταν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε βαμβάκι για τον καθαρισμό του μακιγιάζ ή τη φροντίδα του δέρματος. Εάν δεν χρησιμοποιείτε βαμβάκι, μπορείτε να το αφαιρέσετε.

Εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς.

Ε: Ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος χρήσης; Μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά;

Α: Οι λειτουργίες περιποίησης δέρματος μπορούν να χρησιμοποιούνται καθημερινά, αφού το δέρμα προσαρμοστεί στο μικρορεύμα. Συνιστάται η χρήση των λειτουργιών καθαρισμού 3 φορές την εβδομάδα.

Συνιστούμε τη χρήση του για 10 έως 15 λεπτά ημερησίως, όμως το κάθε άτομο έχει διαφορετική ανεκτικότητα· παρακαλείστε να μειώσετε ή να αυξήσετε τον χρόνο χρήσης ανάλογα με την πραγματική σας κατάσταση.

× Η υπερβολική χρήση μπορεί να επιβαρύνει το δέρμα· αποφύγετε τη χρήση όλων των λειτουργιών καθημερινά.

* Αποφύγετε τη χρήση σε ευαίσθητες περιοχές του δέρματος που έχουν φλεγμονή ή ακμή.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, το οποίο δημιούργησε ο κατασκευαστής.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>. Το προϊόν

πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά, είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση απουσίας πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή τεχνικής εξυπηρέτησης στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση στην φυσική κατάσταση του προϊόντος από αυτή ενός καινούργιου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή τεχνικής εξυπηρέτησης. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης τη στιγμή της ανίχνευσης της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό.

Πριν από τη χρήση, ενημερωθείτε επίσης για τις ακόλουθες πληροφορίες:
Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος ζημιάς του προϊόντος:

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά σύμφωνα με τον προορισμό της, αποφεύγοντας τη χρήση στο σώμα με τρόπο που δεν συμφωνεί με τις οδηγίες.
- Οι μη αδιάβροχες συσκευές δεν πρέπει να βυθίζονται σε νερό ούτε να χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα υψηλής υγρασίας.
- Μην εκθέτετε τα προϊόντα σε ακραίες θερμοκρασίες και αποφύγετε να τα αφήνετε στον ήλιο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
- Για τις συσκευές που λειτουργούν με μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι η φόρτιση γίνεται αποκλειστικά με το παρεχόμενο καλώδιο ή με συμβατό αντάπτορα.

Κίνδυνος για τον χρήστη:

- Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σε ερεθισμένο ή τραυματισμένο δέρμα, σε περίπτωση ανοιχτών πληγών, ενεργών φλεγμονών ή αλλεργικών αντιδράσεων.
Μην χρησιμοποιείτε συσκευές που εκπέμπουν μικρορεύματα, υπερήχους ή θερμότητα εάν έχετε βηματοδότη, μεταλλικά εμφυτεύματα ή είστε έγκυος.
- Σε περίπτωση εμφάνισης αλλεργίας, δυσφορίας ή άλλων ανησυχητικών συμπτωμάτων, διακόψτε αμέσως τη χρήση της συσκευής και συμβουλευτείτε δερματολόγο.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

- Πριν από τη χρήση συσκευών, όπως μασάζ ή αναρροφητικών για μαύρα στίγματα, καθαρίστε καλά το πρόσωπο και εφαρμόστε τα κατάλληλα καλλυντικά (π.χ. τζελ ή νερό) που υποστηρίζουν τη θεραπεία.
Οι συσκευές βαθιάς καθαρισμού, όπως οι υπερηχητικές απολεπιστικές συσκευές, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται το πολύ 2-3 φορές την εβδομάδα, ώστε να αποφεύγεται ο υπερβολικός ερεθισμός του δέρματος.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, μη υπερβαίνοντας τον συνιστώμενο χρόνο λειτουργίας σε κάθε περιοχή του προσώπου (συνήθως 1-2 λεπτά).
- Επιλέξτε το κατάλληλο επίπεδο έντασης, ειδικά αν έχετε ευαίσθητο δέρμα.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Μετά από κάθε χρήση, καθαρίζετε τη συσκευή με ένα υγρό πανί ή άλλο εργαλείο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σε περίπτωση αδιάβροχων συσκευών, μπορείτε να τις ξεπλύνετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των εξαρτημάτων, όπως τις κεφαλές απολέπισης ή τις βούρτσες, και αντικαθιστάτε τα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ξηρό και καθαρό μέρος, αποφεύγοντας την επαφή με υγρασία και σκόνη.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

Προσαρμογή στον χρήστη:

- Επιλέξτε τη συσκευή κατάλληλη για τον τύπο δέρματος και τις ατομικές σας ανάγκες. Λειτουργίες, όπως η θέρμανση ή το μικρορεύμα μασάζ, ενδέχεται να μην ενδείκνυνται για ευαίσθητο ή αγγειοκινητικό δέρμα.
Η χρήση της συσκευής από άτομα με δερματικά προβλήματα, όπως η ροδόχρους ακμή, πρέπει να γίνεται μετά από συμβουλή ιατρού.

Βλάβες και συντήρηση:

- Σε περίπτωση που παρατηρήσετε βλάβες στη συσκευή (π.χ. ρωγμές στο περίβλημα, δυσλειτουργίες ενεργοποίησης, μη σταθερή λειτουργία), διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις του κατασκευαστή.
- Για την αντικατάσταση εξαρτημάτων και αξεσουάρ χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικά εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
- Ελέγχετε τακτικά τη λειτουργία των συσκευών με μπαταρία και φορτίζετε τις σύμφωνα με τις οδηγίες, προκειμένου να αποφύγετε μείωση της απόδοσης ή κίνδυνο βλάβης.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα κατάλληλα

τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ασφάλεια, τη χρήση, συμβατότητα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και την ανθεκτικότητα των υλικών.

Μέτρα ασφαλείας

Πριν από την έναρξη της φόρτισης, ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση. Φροντίστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μ. από άλλα αντικείμενα. Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη φόρτιση. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.τ.λ. χωρίς σύσταση και πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβηστούν. Εφοδιαστείτε με πυροσβεστική κουβέρτα.

Μπαταρία LI - ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (λιθίου - ιόντων), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει από τον δηλωθέντα στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για το στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση μη χρήσης της μπαταρίας ή της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός, η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται στο 50% και το επίπεδο φόρτισής της να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από το φως του ήλιου και από αρνητικές θερμο-

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από τον δηλωθέντα στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της κάτω από το επίπεδο των 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση μη χρήσης της μπαταρίας ή της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός, η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται στο 50% και το επίπεδο φόρτισής της να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από το φως του ήλιου και από αρνητικές θερμοκρα-

Προστασία Περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που φέρει σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπεται να αποτίθεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής των χρησιμοποιημένων συσκευών συμμορφώνεται με την τοπικά ισχύουσα νομοθεσία περιβαλλοντικής προστασίας σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

Το προϊόν CE πληροί τις απαιτήσεις των λεγόμενων οδηγιών. Της Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE), που αφορούν ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεθούν.

Εισαγωγέας: INNPROX

INNPRO Robert Błędowski sp . z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

Shenzhen ANLAN Life Technology Co. , Ltd

2204.Bldg.4 , Cloud Park Phase 2 , BanTianSt . /

518129 Longgang, Shenzhen, Guangdong, Κίνα

support@anlan.com

Αντιπρόσωπος στην Ε.Ε.:

LTI Testing & Certification France S.A.S.

Rue de Rome 154

13006 Μασσαλία, Γαλλία

info@lti-lab.com

Τεχνικές Προδιαγραφές Μπαταρίας Προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κατηγορία Μπαταρίας	Φορητή Μπαταρία
Τύπος Μπαταρίας	Single Cell Li - ion Battery
Περιέχει Κάδμιο / Μόλυβδο (> 0.002 % Cd, > 0.004 % Pb)	Όχι
Καθαρό Βάρος (kg)	0.02179
Χωρητικότητα (mAh)	1600