

ANLAN

Συσκευή ομορφιάς Hot Cool Guasha

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



※ Αυτό το προϊόν δεν είναι ιατρική συσκευή που χρησιμοποιείται για διάγνωση ή θεραπεία, αλλά γενικό μέσο περιποίησης δέρματος για οικιακή χρήση. Για να διασφαλιστεί η ασφαλής και σωστή χρήση, πριν από τη χρήση, παρακαλούμε να διαβάσετε τις παρακάτω οδηγίες χρήσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΚΑ ANLAN

Αποκλειστική εξυπηρέτηση πελατών

Επίσημη διεύθυνση email: service@anlan.com

12 ώρες υπηρεσίας online τις εργάσιμες ημέρες.



Εγγύηση ποιότητας

Επαγγελματική ομάδα έρευνας και ανάπτυξης

9 διαδικασίες δοκιμής πριν από την αποστολή.



service@anlan.com

Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο του εγγράφου για να βεβαιωθείτε ότι καταναίτε όλες τις πληροφορίες. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τηρούνται αυτά τα μέτρα προφύλαξης για να αποφευχθούν τραυματισμοί χρηστών και άλλων ατόμων ή απώλεια περιουσίας.



Κίνδυνος

Υποδεικνύει ότι η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς στον χρήστη.



Προειδοποίηση

Υποδεικνύει ότι η λανθασμένη λειτουργία μπορεί να προκαλέσει εύκολα τραυματισμούς στον χρήστη ή ζημιά στην περιουσία.



Κίνδυνος

Μαζί με αυτή τη συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τα εξής ηλεκτρικά ιατρικά μηχανήματα:

- Εμφυτεύσιμες ιατρικές ηλεκτρονικές συσκευές, όπως
- βηματοδότες
- Ιατρικές ηλεκτρονικές συσκευές για αντικείμενα που απειλούν
- τη ζωή, όπως οι οθόνες καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας
- Ιατρικές ηλεκτρονικές συσκευές που φοριούνται, όπως ηλεκτροκαρδιογράφοι

Εάν βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση, μην χρησιμοποιείς αυτό το προϊόν:

- Θεραπεία από γιατρό.
 - Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης (μπορεί να χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον 6 μήνες μετά τον τοκετό, πριν από τη χρήση πρέπει
 - να συμβουλευτείς γιατρό). Έμμηρος ρύση, θηλασμός
 - Ανήλικοι και άτομα που δεν μπορούν να εκφράσουν καθαρά τις σκέψεις τους.
 - Άτομα που πάσχουν από καρκίνο, επιληψία ή άλλες λειτουργικές αναπηρίες.
 - Άτομα που πάσχουν από ασθένειες του αίματος, μολυσματικές ασθένειες, υπέρταση, κακοήθειες όγκους, εντερικές παθήσεις, οξείες ασθένειες, φυματίωση και πυρετό.
 - Άτομα με αλλεργίες, ευαίσθητο και λεπτό δέρμα, ατοπική δερματίτιδα και δερματικά προβλήματα.
 - Άτομα με δερματικές παθήσεις ή αλλεργία στη θερμότητα.
 - Άτομα των οποίων οι αλλαγές αναπτύχθηκαν ως αποτέλεσμα φυσικής διέγερσης κ.λπ.
 - Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε συσκευές που εκπέμπουν μικροκύματα ή ραδιοκύματα.
 - Άτομα που υποβάλλονται σε οδοντιατρικές διαδικασίες ή γεμίματα μπορεί να αισθάνονται δυσφορία στα δόντια λόγω ερεθισμού EMS. Μειώστε το επίπεδο και προσαρμόστε την περιοχή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
- ※ Οι παραπάνω καταστάσεις μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα ή κακή λειτουργία.




Απαγόρευση

 Προει- δοποι	 Προσοχή
	Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις:
	- Εάν ο χρήστης είναι πολύ κουρασμένος ή σε κακή φυσική κατάσταση. - Κατά τη διάρκεια λήψης στεροειδών ορμονών, ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων ή φαρμάκων που προκαλούν υπνηλία. - Σε περιοχές όπου το δέρμα έχει ακμή, πληγές, προεξέχοντα σημάδια, ιούς κονδυλωμάτων ή σε περιοχές όπου το δέρμα είναι πυώδες και φλεγμονώδες. - Περιοχές όπου το δέρμα είναι ερεθισμένο και ανώμαλο λόγω υπερβολικού ηλιακού εγκαύματος. - Περιοχή όπου οι τρίχες αφαιρούνται ή εξαλείφονται την ημέρα της χρήσης. Εάν έχεις υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση προσώπου (πλαστική χειρουργική, αισθητική επέμβαση κ.λπ.). ※ Τα παραπάνω μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα ή προβλήματα.

※ Σε περίπτωση αμφιβολίας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε προηγουμένως τον γιατρό σας, για να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ομορφιάς, και σε περίπτωση ερωτήσεων να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία. Σε περίπτωση ειδικών μέτρων προφύλαξης σχετικά με τη χρήση, προτεραιότητα έχουν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Προδιαγραφές	
Όνομα προϊόντος	Συσκευή ομορφιάς ANLAN Hot Cool Guasha
Αριθμός μοντέλου	ΔΥΜ-054
Μέγεθος	Περίπου 95*89*34 mm
Βάρος	Περίπου 132g
Υλικό	ABS, PC, κράμα ψευδαργύρου, σιλικόνη
Λειτουργία χρονοδιακόπτη	10 λεπτά (λειτουργία 1 και 3) 5 λεπτά (λειτουργία 2)
Μήκος κύματος	Κόκκινο 610-630 nm , Μπλε 450-470 nm Μωβ 370-390 nm
Δονήσεις	10500RPM±10%
Θερμοκρασία	Λειτουργία θέρμανσης 38-42-45°C (38-42-45°F) Λειτουργία ψύξης 15-14-13°C (15-14-13°F)
Τύπος φόρτισης	Θύρα τύπου C
Μπαταρία	800mAh
Χρόνος λειτουργίας	Περίπου 45 λεπτά (μέγ.)
Χρόνος φόρτισης	Περίπου 2 ώρες

Εμφάνιση προϊόντος

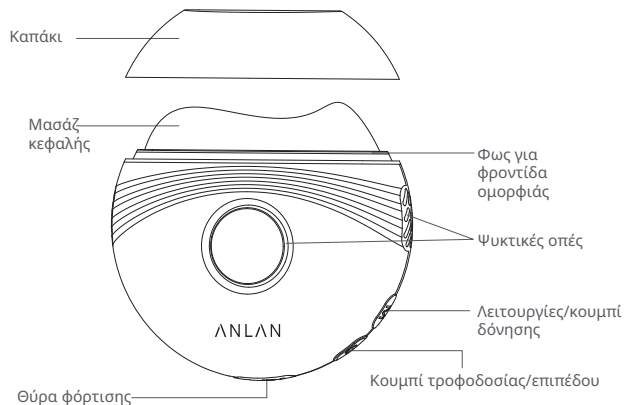

Η λειτουργία μπλε φωτός έχει 5λεπτο ξύπνιο χρονοδιακόπτη, ενώ η λειτουργία κόκκινου και μωβ φωτός έχει 10λεπτο ξύπνιο χρονοδιακόπτη.

Περιεχόμενα συσκευασίας



Κύρια συσκευή x1



Οδηγίες χρήσης x1



Καλώδιο τύπου C x1

Πληροφορίες για τις λειτουργίες και τη λειτουργία

1.Πληροφορίες για τις λειτουργίες

Λειτουργίες	Χαρακτηριστικό	Συνιστώμενο	Συχνότητα Χρήση	Χρονόμετρο
Λειτουργία 1	Κόκκινο φως + Ζεστή κομπρέσα	Τωνωτικό, βάλασμο, τζελ, ορός	5-10 λεπτά Μία ή δύο φορές την ημέρα	10 λεπτά
Λειτουργία 2	Μπλε φως + Σούπερ κομπρέσα	Τωνωτικό, βάλασμο, τζελ, ορός	<5 λεπτά Μία ή δύο φορές την ημέρα	5 λεπτά
Λειτουργία 3	Μωβ φως +EMS Μικρορεύμα	Τωνωτικό, βάλασμο, τζελ, ορός	5-10 λεπτά Μία ή δύο φορές την ημέρα	10 λεπτά

2.Έλεγχος με κουμιά

Κουμπί τροφοδοσίας



Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη συσκευή

Κουμπί επιπέδου



Αφού ενεργοποιηθεί, πατήστε σύντομα για 1 δευτερόλεπτο για να ρυθμίσετε τα επίπεδα θέρμανσης/ψύξης/EMS (επίπεδο 1>επίπεδο 2>επίπεδο 3).

Κουμπί λειτουργίας

Αφού ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία, πατήστε σύντομα για 1 δευτερόλεπτο για να αλλάξετε λειτουργία (κόκκινο-μπλε-μωβ).

Κουμπί δόνησης ☐ M

Αφού ενεργοποιηθεί, πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία δόνησης.

Κανόνες χρήσης



Προσοχή:

- Πριν από τη χρήση, πρέπει να καθαρίσετε το δέρμα στην περιοχή μασάζ.
- Η χρήση της λειτουργίας μικρορευμάτων απαιτεί τη διατήρηση του δέρματος σε κάποιο βαθμό ενυδάτωσης.
- Εάν το δέρμα γίνει ξηρό κατά τη διάρκεια της χρήσης, πρέπει να ανανεωθούν και να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα ενυδατικά προϊόντα, ώστε το μικρορεύμα EMS να λειτουργεί καλύτερα.
- Μπορείτε να ακολουθήσετε τα προτεινόμενα βήματα ή να συνδυάσετε τις λειτουργίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Περιποίηση προσώπου



1. Καθαρίστε καλά το πρόσωπο.



2. Εφαρμόστε στο πρόσωπο προϊόντα περιποίησης δέρματος, όπως τονωτική λοσιόν, ορό, βάμμα.



3. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία 1, για να ανυψώσετε το πρόσωπο προς τα πάνω προκειμένου να αυξήσετε την απορρόφηση.

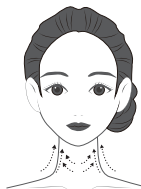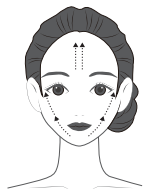

4. Αφού απορροφηθεί η ουσία, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία 2, για να κλειδώσετε τα θρεπτικά συστατικά.
5. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία 3 για μασάζ προς τα πάνω, για να μειώσετε το πρήξιμο, να σφίξετε το δέρμα και να μειώσετε τις ρυτίδες.

Φροντίδα σώματος


1. Πλύνετε καλά το σώμα.




2. Εφαρμόστε βάμμα σώματος, τζελ ή αιθέριο έλαιο στην πλάτη, τον ώμο ή το πόδι.




3. Επιλέξτε τις αγαπημένες σας λειτουργίες μασάζ δέρματος

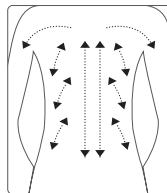

Πλάτη

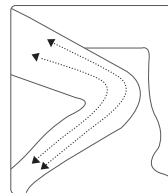

Πόδι

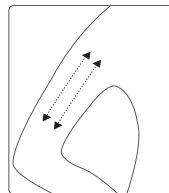

Ωμος

Πληροφορίες φόρτισης

- Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να την φορτίσετε πλήρως.
- Εάν το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να φορτιστεί πλήρως πριν από τη χρήση.
- Για να προστατεύσετε την ενσωματωμένη μπαταρία, θα πρέπει να την φορτίζετε μία φορά το μήνα, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Όταν η μπαταρία είναι αποφορτισμένη, συνδέστε τη συσκευή με το καλώδιο φόρτισης και τον φορτιστή, και στη συνέχεια συνδέστε τα σε μια οικιακή πρίζα
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το κόκκινο φως του διακόπτη αναβοσβήνει. Αφού φορτιστεί πλήρως, το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα παραμείνει φωτισμένο.
- Πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή θερμοκρασία μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, φορτίστε σε θερμοκρασία δωματίου μεταξύ 15 °C και 30 °C.
- Η κύρια συσκευή μπορεί να θερμαίνεται ελαφρώς κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά αυτό δεν είναι βλάβη.

※ Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

※ Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι η θύρα φόρτισης είναι καθαρή και στεγνή.

※ Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο προσαρμογέα τάσης που αναφέρεται σε αυτές τις οδηγίες.

Καθαρισμός και αποθήκευση

- Η συσκευή πρέπει να απενεργοποιείται εγκαίρως μετά τη χρήση. Εάν στη συσκευή
- υπάρχει βάλασμα, έλαιο ή τζελ, πρέπει να καθαριστεί εγκαίρως. Κατά τον καθαρισμό, πρέπει να απενεργοποιείτε την τροφοδοσία για να απο-
- φύγετε ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή φωτιά.
Αυτό το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο, δεν πρέπει να πλένεται με νερό, για να αποφευχθεί
- η ζημιά στη συσκευή και η κακή λειτουργία της.
Σκουπίστε τη βρωμιά με ένα μαλακό πανί βρεγμένο με νερό και στριμωγμένο. Εάν η βρωμιά δεν αφαιρεθεί, σκουπίστε την απαλά με ένα πανί βρεγμένο με
- αραιωμένο ουδέτερο απορρυπαντικό.
Μην χρησιμοποιείτε αλκαλικά καθαριστικά, αλκοόλ, διαλύτες, βενζίνη, αφαίρεση βερνικιού νυχιών κ.λπ.
- Απαγορεύεται η χρήση λιπαρών ουσιών, λευκαντικών κ.λπ.
- Δεν πρέπει να αποσυναρμολογείτε, να επισκευάζετε ή να τροποποιείτε τη συσκευή μόνοι σας.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει ατυχήματα, βλάβες, ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση, αποσυναρμολόγηση, τροποποίηση, επισκευή κ.λπ. και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την μη τήρηση των παραπάνω μέτρων προστασίας και προειδοποιήσεων.

Προστασία Περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπάγεται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας την σωστή του απόρριψη, αποφεύγετε πιθανές, αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής απορριμμάτων είναι σύμφωνο με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από τον δήμο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα, στο οποίο αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών του λεγόμενου Νέου Προσανατολισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης ή υπηρεσίας στην οδηγία χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείτε τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, την απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτήν ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή υπηρεσίας. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση κατάστασης απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσεις τη διαδικασία φόρτισης, έλεγξε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. Ποτέ μην αφήνεις τη συσκευή κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης χωρίς επιτήρηση. Φρόντισε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείς να αποσυνδέσεις γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας. Ποτέ μην εκθέτεις τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φόρτισε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα. Ποτέ μην καλύπτεις τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ποτέ μην χρησιμοποιείς τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τις συστάσεις και την πιστοποίηση του κατασκευαστή. Φρόντισε την περιουσία σου, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολες να σβηστούν, εφοδιασμού με μια πυροσβεστική κουβέρτα.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (λιθίου-ιόντος), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γεννά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την εκφορτίζετε σε επίπεδο κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για το κύτταρο, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολοκληρώ τη συσκευή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έναν μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Προστάτεψε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γεννά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρήσετε τη μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε σε επίπεδο κάτω από 3,5V ή 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για την μπαταρία, τις καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που παραλείψετε να χρησιμοποιήσετε την μπαταρία ή ολοκληρώ τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από έναν μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στην οδηγία χρήσης. Πριν αρχίσεις να το χρησιμοποιείς, διάβασε το περιεχόμενο του και ακολούθησε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Πριν τη χρήση, ενημερώσου επίσης για τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν:

- Χρησιμοποιήστε τις συσκευές αποκλειστικά σύμφωνα με τον προορισμό τους, αποφεύγοντας τη χρήση τους στο σώμα με τρόπο που δεν συμφωνεί με τις οδηγίες.
- Οι μη αδιάβροχες συσκευές δεν πρέπει να βυθίζονται στο νερό ούτε να χρησιμοποιούνται σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.
- Μην εκθέτετε τα προϊόντα σε ακραίες θερμοκρασίες ούτε να τα αφήνετε στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Σε περίπτωση συσκευών που τροφοδοτούνται με μπαταρία, βεβαιώσου ότι η φόρτιση γίνεται αποκλειστικά με το παρεχόμενο καλώδιο ή συμβατό ανάπτορα.

Κίνδυνος για τον χρήστη:

- Απόφυγε τη χρήση των συσκευών σε ερεθισμένο, κατεστραμμένο δέρμα, σε περίπτωση ανοιχτών πληγών, ενεργών φλεγμονών ή αλλεργικών αντιδράσεων.
- Μη χρησιμοποιείς συσκευές που εκπέμπουν μικρορεύματα, υπερήχους ή θερμότητα, εάν έχεις βηματοδότη, μεταλλικά εμφυτεύματα ή είσαι έγκυος.
- Σε περίπτωση εμφάνισης αλλεργίας, δυσφορίας ή άλλων ανησυχητικών συμπτωμάτων, σταμάτησε αμέσως τη χρήση της συσκευής και συμβουλευσου έναν δερματολόγο.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

- Πριν από τη χρήση συσκευών, όπως μασάζ ή απορροφητές σμήγματος, καθαρίστε καλά το πρόσωπο και εφαρμόστε τα κατάλληλα καλλυντικά (π.χ. τζελ ή νερό) που υποστηρίζουν τη διαδικασία.
- Συσκευές για βαθύ καθαρισμό, όπως οι καυτές απολέπιση, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται το πολύ 2-3 φορές την εβδομάδα, για να αποφευχθεί η υπερβολική ερεθιστικότητα του δέρματος.
- Χρησιμοποιήστε τις συσκευές σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χωρίς να υπερβαίνετε τον προτεινόμενο χρόνο λειτουργίας σε μία περιοχή του προσώπου (συνήθως 1–2 λεπτά).
- Επίλεξε το κατάλληλο επίπεδο έντασης, ιδιαίτερα αν έχεις ευαίσθητο δέρμα.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Μετά από κάθε χρήση, καθαρίσε τη συσκευή με ένα υγρό πανί ή άλλο εργαλείο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σε περίπτωση αδιάβροχων συσκευών, μπορείς να τις ξεπλύνεις κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Έλεγξε τακτικά την κατάσταση των αξεσουάρ, όπως οι κεφαλές για απολέπιση ή οι βούρτσες, και αντικατέστησέ τα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Αποθήκευσε τις συσκευές σε ξηρό, καθαρό μέρος, αποφεύγοντας την επαφή με την υγρασία και τη σκόνη.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

Προσαρμογή στον χρήστη:

- Επίλεξε τη συσκευή που είναι κατάλληλη για τον τύπο του δέρματός σου και τις ατομικές σου ανάγκες. Λειτουργίες όπως η θέρμανση ή το μασάζ μικρορεύματος μπορεί να μην είναι κατάλληλες για ευαίσθητο ή ευρυανθητικό δέρμα.
- Η χρήση συσκευών από άτομα με δερματικά προβλήματα, όπως η ροδόχρους ακμή, θα πρέπει να γίνεται μετά από συμβουλή γιατρού.

Βλάβες και σέρβις:

- Σε περίπτωση που παρατηρήσεις βλάβες στη συσκευή (π.χ. ρωγμές στη θήκη, προβλήματα στην εκκίνηση, ασταθής λειτουργία) σταμάτησε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήσε με τον εξουσιοδοτημένο σέρβις του κατασκευαστή.
- Για την αντικατάσταση τμημάτων και αξεσουάρ χρησιμοποίησε μόνο γνήσια εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
- Ελέγχετε τακτικά τη λειτουργία των συσκευών που φορτίζονται με μπαταρία και φορτίζετε τις σύμφωνα με τις οδηγίες, για να αποφύγετε την πτώση απόδοσης ή τον κίνδυνο ζημιάς.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Πληρούν τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την ασφάλεια χρήσης, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ανθεκτικότητα των υλικών.

Κατασκευαστής:

Anlan International Development Limited
Δωμάτιο 2609, Κτίριο Πόρων Κίνας, 26 Λεωφόρος Λιμένα, Wanchai,
Χονγκ Κονγκ, Κίνα

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ:

LTI Testing & Certification France S.A.S.
154 Rue de Rome, 13006 Μασσαλία ΓΑΛΛΙΑ
info@lti-lab.com

εισαγωγέας::



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65C
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κωδικός προϊόντος	-
Κωδικός EAN	6977254870823
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου-ιόντων (Li-Ion)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Όχι
Καθαρό βάρος (kg)	0.00728
Χωρητικότητα (mAh)	400