

ANLAN



Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη φορητή συσκευή ομορφιάς ANLAN RE. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Επιπλέον, το παρόν εγχειρίδιο χρησιμεύει και ως έγγραφο εγγύησης, γι' αυτό παρακαλούμε φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος.

Οδηγίες Ασφαλείας

Πριν από τη χρήση της φορητής RF συσκευής ομορφιάς, παρακαλούμε μελετήστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.



Κίνδυνος


- Κρατήστε αυτή τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Μην πετάτε αυτή τη συσκευή στη φωτιά.
- Φυλάξτε αυτή τη συσκευή σε ασφαλές σημείο ώστε να μην πέσει και υποστεί ζημιά.




Κίνδυνος

- Κατά τη φόρτιση, χρησιμοποιήστε αποκλειστικά φορτιστή ή εξωτερική μπαταρία με έξοδο 5 V για τη φόρτιση της συσκευής.
- Εάν η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, μην τη χρησιμοποιήσετε ξανά για να αποφύγετε τραυματισμούς.
- Για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, φορτίζετε πλήρως τη συσκευή τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο μήνες.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 12 ετών, για άτομα με σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές αναπηρίες, ούτε για χρήστες που δεν διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία και γνώσεις, εκτός εάν επιβλέπονται ή εκπαιδεύονται από υπεύθυνο πρόσωπο για την ασφάλειά τους.
- Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα στις υποδοχές της συσκευής, ώστε να αποφευχθεί βραχυκύκλωμα.
- Η χρήση της συσκευής δεν συνιστάται για εγκύους ή γυναίκες που θηλάζουν.

Παρουσίαση προϊόντος

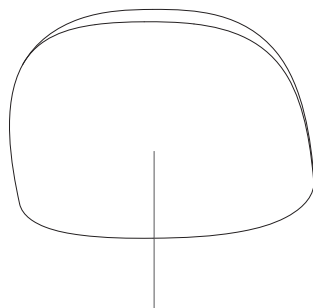


Προστατευτικό σκόνης

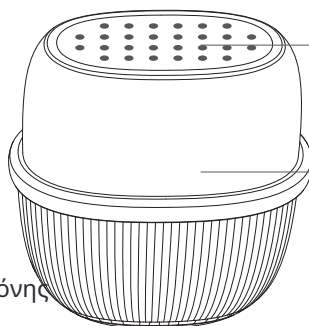

RF
ηλεκτρόδιο σημείου

RF συσκευή
ομορφιάς

Κουμπί ενεργοποίησης /
Κουμπί λειτουργίας /
Κουμπί δόνησης

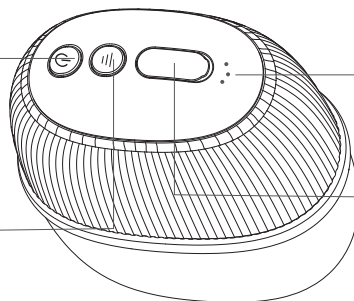

Ενδεικτική λυχνία επιπέδου /
Ενδεικτική λυχνία φόρτισης

Υποδοχή φόρτισης

Κουμπί ρύθμισης επιπέδου


Προδιαγραφές

Όνομα	Συσκευή ομορφιάς ANLAN RF
Μοντέλο	1612
Ισχύς	10 W
Συχνότητα	1000 kHz (1 MHz)
Βάρος	Περίπου 146 g
Διαστάσεις	Περίπου 86 x 67 x 40 mm
Χωρητικότητα μπαταρίας	1000 mAh
Χρόνος φόρτισης	Περίπου 2,5 ώρες
Χρόνος λειτουργίας	Περίπου 1 ώρα
Είσοδος	DC 5V 1A
Υποδοχή φορτιστή	Type-C
Επίπεδο αδιαβροχοποίησης	IPX6
Ζεστή κομπρέσα	Περίπου 42°C - 50°C
Θερμοκρασία	1ο επίπεδο: 5100 - 8100 (RPM)
Ένταση δόνησης	2. Επίπεδο: 6800 - 10800 (RPM) 3. Επίπεδο: 8500 - 13500 (RPM)

Κατάλογος περιεχομένων συσκευασίας



Συσκευή ομορφιάς RF x1

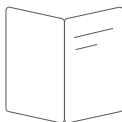

Οδηγίες φροντίδας x1



Καλώδιο σύνδεσης x1

Οδηγίες χρήσης του προϊόντος

Εισαγωγή στις λειτουργίες


1. Τρεις λειτουργίες: Λειτουργία σφραγίδας RF, λειτουργία EMS, λειτουργία ολίσθησης RF.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης. Μετά την ενεργοποίηση, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία.
3. Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, πατήστε το κουμπί επιπέδου για να επιλέξετε την ένταση που σας ταιριάζει.
4. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα.
- Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης για προστασία: Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 10 λεπτά.
5. Ενεργοποίηση της δόνησης:
Πατήστε γρήγορα δύο φορές το κουμπί ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη δόνηση σε οποιαδήποτε λειτουργία και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά δύο φορές γρήγορα το κουμπί ενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε τη δόνηση. Η δόνηση απενεργοποιείται αυτόματα όταν αλλάζει η λειτουργία.

Η ένταση της δόνησης μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία επίπεδα.

1. Βασική αρχή λειτουργίας και επίδραση

Σε αυτή τη λειτουργία, τα ραδιοκύματα και το κόκκινο νανοφως λειτουργούν ταυτόχρονα. Τα ραδιοκύματα διαθέτουν 3 επίπεδα.

Τα ραδιοκύματα διεισδύουν στους υποδόριους ιστούς, προκαλώντας φυσικές κινήσεις αντίστασης, οι οποίες παράγουν θερμική ενέργεια. Αξιοποιώντας την αρχή της συστολής των ινών κολλαγόνου στην επιδερμίδα, επιτυγχάνεται διπλή δράση: ενισχύεται το δέρμα και προάγεται η αναγέννηση του κολλαγόνου. Ενώ το κολλαγόνο προκαλεί άμεση σύσπαση, ταυτόχρονα διεγείρει την επιδερμίδα να παράγει περισσότερες νέες ίνες κολλαγόνου για την αναγέννηση, υποστηρίζοντας εκ νέου τον ινώδη ιστό του δέρματος, αυξάνοντας το πάχος και την πυκνότητα της επιδερμίδας, γεμίζοντας τις ρυτίδες και βελτιώνοντας την χαλάρωση του δέρματος.

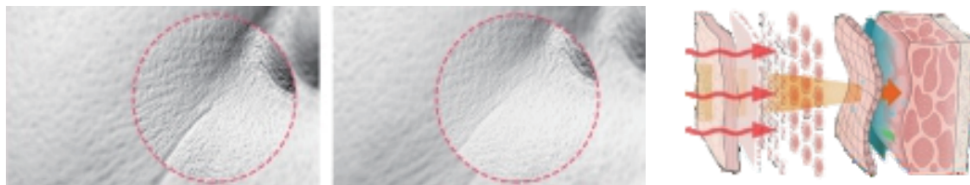

Η νανοφωτεινή κόκκινη LED ακτινοβολία μήκους κύματος 615-650 nm χρησιμοποιεί κοσμητολογικό φωτισμό, ο οποίος μπορεί να βελτιώσει τη μικροκυκλοφορία του λεμφικού συστήματος και να διεγείρει τη μιτοχονδριακή δραστηριότητα των κυττάρων. Το ειδικό μήκος κύματος του κόκκινου LED φωτός εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες που παράγονται στα κύτταρα, διεγείρει τους ινοβλάστες για την παραγωγή κολλαγόνου και επιταχύνει την αιματική κυκλοφορία, επιτυγχάνοντας φωτοαναζωογόνηση.

Τα συνεχόμενα κύματα δόνησης μαλάσσουν το δέρμα, το ενισχύουν, προάγουν την απορρόφηση των καλλυντικών περιποίησης και αποτρέπουν αποτελεσματικά το σχηματισμό ρυτίδων και την χαλάρωση του δέρματος.

2. Οδηγίες χρήσης

1. βήμα: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι η λειτουργία σφραγίδας RF και το επίπεδο 1. Ρυθμίστε το επίπεδο σύμφωνα με το βαθμό διέγερσης που μπορεί να αντέξει το δέρμα σας.
2. βήμα: Αφού εφαρμόσετε την ουσία (ή κατά την εφαρμογή μάσκας), αγγίξτε το δέρμα και πραγματοποιήστε τη διαδικασία «σφράγισης».
3. βήμα: Εκτελέστε τη διαδικασία πίεσης στο πρόσωπό σας με σειρά. Μετά από περίπου 6 δευτερόλεπτα, θα ακούσετε έναν ήχο «μπιπ», που σημαίνει ότι η σφράγιση της συγκεκριμένης περιοχής ολοκληρώθηκε και η περιοχή σφράγισης αλλάζει, έως ότου καλυφθεί ολόκληρο το πρόσωπο και ολοκληρωθεί ένας κύκλος κοσμετολογικής σφράγισης.

Σημείωση: Σε αυτή τη λειτουργία, η ενέργεια ραδιοκυμάτων μειώνεται αυτόματα μετά από έναν ήχο «μπιπ» και η συσκευή τίθεται σε ημι-αδρανή κατάσταση προστασίας. Όταν η συσκευή απομακρύνεται από το δέρμα και τοποθετείται ξανά, η ενέργεια ραδιοκυμάτων ενεργοποιείται εκ νέου. Επομένως, ακόμη και αν δεν αφαιρέσετε έγκαιρα τη συσκευή από το δέρμα μετά τον ήχο «μπιπ», δεν θα προκαλέσει βλάβη στο δέρμα.

1. Βασική αρχή λειτουργίας και επίδραση

Σε αυτή τη λειτουργία, το μικρορεύμα EMS λειτουργεί ταυτόχρονα με το μπλε καλλυντικό νανοφως.

Το EMS μικρορεύμα τροφοδοτεί τους μύες του προσώπου και τα νεύρα του δέρματος, συσφίγγει αποτελεσματικά τα κύτταρα του δέρματος, ενεργοποιεί τα κύτταρα, διεγείρει την αναγέννησή τους, προάγει τον μεταβολισμό, μειώνει το οίδημα του δέρματος και ταυτόχρονα συσφίγγει και ενισχύει το δέρμα.

Η μπλε LED νανοφωτεινή πηγή κοσμητολογικού φωτισμού μήκους κύματος 450-480 nm ρυθμίζει την ισορροπία λιπαρότητας και υδάτωσης του δέρματος, καθαρίζει, απολυμαίνει και αφαιρεί τα σπυράκια.

2. Χρήση

1. Βήμα: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι η λειτουργία σφραγίδας RF (κόκκινο φως). Πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης μία φορά, η λειτουργία εναλλάσσεται σε λειτουργία EMS (μπλε φως). Ρυθμίστε το επίπεδο σύμφωνα με την ένταση της διέγερσης που μπορεί να αντέξει το δέρμα σας.

2. Βήμα: Μετά την εφαρμογή της ουσίας (ή της μάσκας), αγγίξτε το δέρμα με το κεφάλι μασάζ και πραγματοποιήστε αργές, ολισθηρές κινήσεις.

[Προτάσεις περιποίησης δέρματος]

Πρόταση επιπέδου: σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις

1. Το δέρμα στο μέτωπο είναι λεπτότερο, προτεινόμενο επίπεδο : 1-2.

2. Το δέρμα γύρω από τα μάτια είναι το λεπτότερο, προτεινόμενο επίπεδο : 1-2.



3. Το δέρμα στο πρόσωπο είναι φυσιολογικό, προτεινόμενο επίπεδο: 2-3.

4. Η επιφάνεια του δέρματος στο πρόσωπο είναι φυσιολογική, προτεινόμενο επίπεδο: 2-3.

Για την προώθηση της αναγέννησης κολλαγόνου, συνιστάται η χρήση της λειτουργίας σφράγισης RF [RF Stamping Mode] για 5 λεπτά, ενώ για τη σύσφιξη και το lifting του δέρματος, η χρήση της λειτουργίας EMS [EMS Mode] για 5 λεπτά μαζί με ορό ή τζελ.



Λειτουργία σφράγισης RF 5 λεπτά




Λειτουργία EMS διάρκειας 5 λεπτών

1. Βασική αρχή λειτουργίας και επίδραση

Σε αυτή τη λειτουργία, τα ραδιοκύματα δρουν σε συνδυασμό με τη λειτουργία EMS και το πορτοκαλί νανοφως.

Τα ραδιοκύματα διαθέτουν 3 επίπεδα.

Τα ραδιοκύματα παράγουν θερμική ενέργεια που αυξάνει το πάχος και την πυκνότητα της επιδερμίδας, αποκαθιστά τις δικτυωτές ίνες, μειώνει τις ρυτίδες και βελτιώνει τη χαλάρωση του δέρματος.

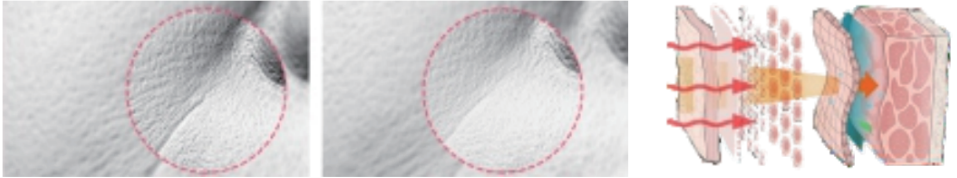

Το πορτοκαλί LED νανοφως χρησιμοποιεί κοσμητολογικό φωτισμό με μήκος κύματος 600-610 nm, ο οποίος βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία του δέρματος, αυξάνει την ελαστικότητά του, μειώνει τις ρυτίδες και τις ραβδώσεις και καθυστερεί τη γήρανση του δέρματος.

Προσοχή: Τα ραδιοκύματα που παράγονται σε αυτή τη συνεχή λειτουργία μπορεί να θερμάνουν την επιδερμίδα του δέρματος. Παρακαλούμε να μετακινείτε συνεχώς την κεφαλή μασάζ όσο αυτή έρχεται σε επαφή με το δέρμα. Ο μέγιστος χρόνος έκθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6 δευτερόλεπτα. Μην αφήνετε την ίδια περιοχή του δέρματος για πολύ χρόνο, προκειμένου να αποφύγετε εγκαύματα.

2. Οδηγίες χρήσης

1. βήμα: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι η λειτουργία σφραγίδας RF (κόκκινο φως). Με το διπλό πάτημα του κουμπιού ενεργοποίησης ενεργοποιείται η λειτουργία ολίσθησης RF (πορτοκαλί φωτισμός) και το επίπεδο 1. Μπορείτε να προσαρμόσετε το επίπεδο ανάλογα με την αντίδραση του δέρματος στη διέγερση.

2. βήμα: Μετά την εφαρμογή της ουσίας (ή κατά την εφαρμογή μάσας), τοποθετήστε το ακροφύσιο μασάζ στο δέρμα και πραγματοποιήστε αργές, ολισθαίνουσες κινήσεις.

Προτεινόμενος χρόνος χρήσης

[Λειτουργία σφράγισης RF]

Συνιστάται η χρήση 1 έως 4 φορές εβδομαδιαίως, ανάλογα με τον τύπο δέρματος.

[Κανονικό δέρμα]: 3 φορές την εβδομάδα, περίπου 10 λεπτά ανά συνεδρία

[Ξηρό δέρμα]: 2 φορές την εβδομάδα, περίπου 10 λεπτά ανά συνεδρία

[Λιπαρό δέρμα]: 3-4 φορές την εβδομάδα, περίπου 5-10 λεπτά ανά συνεδρία

[Ευαίσθητο δέρμα]: μία φορά την εβδομάδα, περίπου 5-10 λεπτά κάθε φορά

[Λειτουργία EMS]

Συνιστάται η χρήση μία φορά ανά δύο ημέρες.

Η λειτουργία σφράγισης RF και η λειτουργία EMS μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα για πλήρη περιποίηση ομορφιάς. Συνιστάται η χρήση της λειτουργίας σφράγισης RF για 5 λεπτά, για την προώθηση της ανανέωσης του κολλαγόνου, και στη συνέχεια της λειτουργίας EMS για 5 λεπτά με την απομένουσα από τη μάσκα ουσία ή τζελ, για τη σύσφιξη και ανόρθωση του δέρματος.

[Λειτουργία ολίσθησης RF]

Συνιστάται η χρήση μία φορά ανά δύο ημέρες, κάθε φορά για 5-10 λεπτά.

Αυτή η λειτουργία περιλαμβάνει RF + EMS λειτουργίες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανύψωση της γραμμής του προσώπου και επιλέγονται ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες.

Συνιστώμενη σειρά εφαρμογής στην περιοχή του προσώπου: αριστερό μάγουλο, δεξί μάγουλο, μέτωπο.



Βήματα περιποίησης δέρματος

1. Βήμα: Καθαρισμός και αφαίρεση μακιγιάζ


Αφαιρέστε το μακιγιάζ και καθαρίστε σχολαστικά το πρόσωπο και τον λαιμό σας.

2. Βήμα: Εφαρμογή τζελ ή μάσκας



- Αφαιρέστε τη μάσκα και τοποθετήστε την στο πρόσωπό σας (η μάσκα πρέπει να είναι επίπεδη και να εφαρμόζει σωστά στο πρόσωπο).

- Εναλλακτικά, εφαρμόστε την essence στο πρόσωπό σας ή απευθείας στην κεφαλή μασάζ (τζελ).

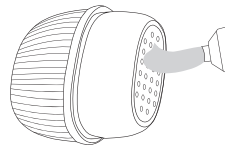


3. βήμα: Περιποίηση προσώπου

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή, επιλέξτε μία λειτουργία και χρησιμοποιήστε ταυτόχρονα μόνο μία λειτουργία, ή χρησιμοποιήστε και τις τρεις λειτουργίες ταυτόχρονα.

- Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια κατά τη χρήση, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα, υποδεικνύοντας ότι η λειτουργία χρησιμοποιήθηκε για 10 λεπτά.

Μπορείτε να επανεκκινήσετε τη συσκευή και να συνεχίσετε τη χρήση της.

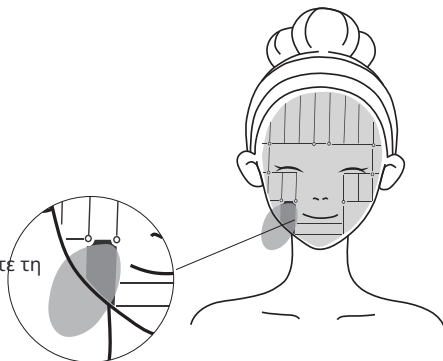


4. βήμα: Καθαρισμός και ενυδάτωση

Μετά τη θεραπεία, πλύνετε το πρόσωπό σας με καθαρό νερό και εφαρμόστε προϊόντα περιποίησης δέρματος κατάλληλα για τις ατομικές σας ανάγκες, προκειμένου να ενυδατώσετε το δέρμα σας.

5. βήμα: Η σωστή συντήρηση της συσκευής

- Αφού ολοκληρώσετε την περιποίηση του δέρματος, σκουπίστε τα υπολείμματα από τη συσκευή καλλυντικών με μια μαλακή, ελαφρώς υγρή πετσέτα.

- Εάν υπάρχουν πολλά υπολείμματα, μπορείτε να τα ξεπλύνετε άμεσα με καθαρό νερό και στη συνέχεια να τα σκουπίσετε με στεγνή πετσέτα.

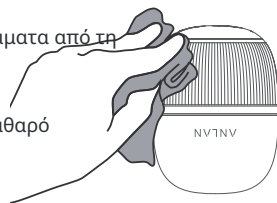

Προσοχή: Παρόλο που αυτό το προϊόν είναι πλενόμενο, η συχνή πλύση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Παρακαλούμε να καθαρίζετε τη συσκευή όσο το δυνατόν πιο σχολαστικά.

Πώς να φορτίσετε τη συσκευή

1. Συνδέστε το καλώδιο USB σε έναν ανάπτορα φόρτισης 5V/1A (μπορείτε επίσης να το συνδέσετε σε υπολογιστή ή εξωτερική μπαταρία) και έπειτα εισάγετε την υποδοχή Type-C στη συσκευή

2. Κατά τη φόρτιση, το LED αναβοσβήνει σε λειτουργία «αναπνοής». Μετά την πλήρη φόρτιση, το LED παραμένει σταθερά αναμμένο και δεν αναβοσβήνει πλέον.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

- Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή φόρτισης της συσκευής είναι στεγνή και δεν υπάρχουν υπολείμματα νερού ή καλλυντικών.
- Μην φορτίζετε τη συσκευή σε μέρη όπου μπορεί να βυθιστεί σε νερό.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά μέταλλα, λειαντικά καθαριστικά ή διαβρωτικά υγρά (π.χ. ακετόνη) για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Καθαρίστε σχολαστικά την κεφαλή μασάζ της συσκευής μετά από κάθε χρήση με καθαρό νερό ή νωπό χαρτί υγείας και στη συνέχεια στεγνώστε την.

Ειδοποίηση για χαμηλό επίπεδο φόρτισης μπαταρίας

Εάν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλό, η συσκευή εκπέμπει 5 ηχητικούς τόνους για να υπενθυμίσει στον χρήστη την ανάγκη φόρτισης και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.

Σφάλματα/Προβλήματα και Λύσεις

Ερωτήσεις	Αιτίες	Λύση
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται	Χαμηλό επίπεδο φόρτισης	Αφού φορτιστεί πλήρως, δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
	Η μπαταρία έχει εξαντληθεί	Για επισκευή ή αντικατάσταση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πωλητή.
	Περισσότερο από 10 λεπτά Καμία ενέργεια	Επανεκκινήστε τη συσκευή.
	Χαμηλό επίπεδο φόρτισης μπαταρίας	Αφού φορτιστεί πλήρως, προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Δεν μπορεί να φορτιστεί	Μη συμβατό Χρήση αντάπτορα φόρτισης	Χρησιμοποιήστε αντάπτορα φόρτισης με έξοδο 5 V (ή εξωτερική μπαταρία).
Η αίσθηση ότι το πρόσωπό σας είναι πολύ ζεστό	Πολύ υψηλό επίπεδο	Μειώστε το επίπεδο.
	Η συσκευή παραμένει ακίνητη στο πρόσωπο	Μετακινήστε ελαφρώς τη συσκευή. Πιο γρήγορα.
Το πρόσωπο δεν έχει επαρκή θερμότητα	Πολύ χαμηλό επίπεδο	Αυξήστε το επίπεδο.
	Η συσκευή κινείται πολύ γρήγορα.	Μειώστε ελαφρώς την ταχύτητα της συσκευής.
	Ανεπαρκής ορός/ζελ	Εφαρμόστε περισσότερο ορό ή τζελ στο πρόσωπό σας.
	Η συσκευή μόλις ενεργοποιήθηκε και η παροχή ρεύματος δεν είναι επαρκής.	Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αυτό το έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου οδηγιών χρήσης, που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Ο χρήστης οφείλει να πραγματοποιεί τακτική συντήρηση (καθαρισμό) της συσκευής ή να απευθύνεται σε εξειδικευμένο τεχνικό κέντρο με δικά του έξοδα. Αν στις οδηγίες χρήσης δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή επισκευής, η κατάσταση της συσκευής σε σχέση με ένα καινούριο φυσικό προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η κατάλληλη συντήρηση (καθαρισμός) και η έγκαιρη αντίδραση σε περίπτωση ανίχνευσης ασυνήθιστης κατάστασης είναι απαραίτητες, καθώς η παράλειψή τους μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στη συσκευή. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής περιλαμβάνονται στον οδηγό χρήσης. Παρακαλέστε να διαβάσετε το περιεχόμενο πριν τη χρήση και να ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτόν.

Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε διαβάστε και τις ακόλουθες πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος βλάβης του προϊόντος:

- Χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μόνο σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σκοπό.
- Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε τραυματισμένο, ερεθισμένο ή καμένο δέρμα.
- Σε περιπτώσεις αποτριχωτικών IPL, αποφύγετε τη χρήση σε μαυρισμένο δέρμα για την αποφυγή αποχρωματισμών και ερεθισμών.
- Τα ηλεκτρικά βουρτσάκια και τρίφτες πρέπει να καθαρίζονται τακτικά και να ελέγχονται για μηχανικές φθορές, όπως ρωγμές ή φθαρμένες κεφαλές.
- Μην βυθίζετε τις ηλεκτρικές συσκευές σε νερό, εκτός αν ο κατασκευαστής τις έχει χαρακτηρίσει αδιάβροχες.
- Μην αφήνετε τις συσκευές σε υγρό περιβάλλον, εάν δεν έχουν σχεδιαστεί για τέτοια χρήση.

Κίνδυνοι που αφορούν τον χρήστη:

- Οι αποτριχωτικές IPL μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό του δέρματος σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης. Πριν από την πρώτη χρήση, πραγματοποιήστε δοκιμή σε μία μικρή περιοχή του δέρματος.
- Οι συσκευές EMS (ηλεκτρικής μυϊκής διέγερσης) δεν προορίζονται για άτομα με βηματοδότη, εγκυμονούσες γυναίκες ή άτομα με δερματικές παθήσεις.
- Οι ηλεκτρικές λίμες φτέρνας πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε στεγνό δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με ανοιχτές πληγές.
- Για την αποφυγή εγκαυμάτων, αποφύγετε τη χρήση ζεστών συσκευών σε ευαίσθητες περιοχές του σώματος.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με ηλεκτρονικά εξαρτήματα:

- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικούς φορτιστές και αξεσουάρ που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
- Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας και οι μπαταρίες είναι σε άριστη κατάσταση.
- Διακόψτε αμέσως τη χρήση εάν εντοπίσετε ζημιά στα καλώδια ή στην μπαταρία.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις χρήσης:

- Οι IPL αποτριχωτικές συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούνται σε καθαρό και ξηρό δέρμα, αποφεύγοντας ευαίσθητες περιοχές, όπως η περιοχή γύρω από τα μάτια. Η τακτική εφαρμογή των θεραπειών εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα.

- Καθαρίζετε τις άκρες της βούρτσας μασάζ σώματος μετά από κάθε χρήση για την αποφυγή ανάπτυξης βακτηρίων. Ρυθμίστε την ένταση του μασάζ σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες του δέρματος.
- Χρησιμοποιήστε τα ανταλλακτικά λίμες για τους τροχίσκους πτέρνας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Καθαρίζετε τη συσκευή από τα υπολείμματα νεκρού δέρματος μετά από κάθε χρήση.
- Σε συσκευές EMS, τοποθετείτε τους ηλεκτροδότες μόνο σε καθαρό και ξηρό δέρμα, αποφεύγοντας τις ευαίσθητες περιοχές και τις ανοικτές πληγές.

Συντήρηση και αποθήκευση

- Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή μετά από κάθε χρήση με υγρό πανί ή με καθαριστικά κατάλληλα για το σκοπό αυτό.
- Αποθηκεύετε τις συσκευές σε ξηρό χώρο, αποφεύγοντας ακραίες θερμοκρασίες και απευθείας έκθεση στον ήλιο.
- Μετά τη χρήση, απενεργοποιείτε τις συσκευές με μπαταρία ή επαναφορτιζόμενη μπαταρία και τις φορτίζετε σύμφωνα με τον οδηγό χρήσης.

Περαιτέρω μέτρα προφύλαξης

Προσαρμογή στον χρήστη:

- Παρακολουθείτε τακτικά την αντίδραση του δέρματος κατά τη χρήση της συσκευής. Σε περίπτωση ερεθισμού ή ερυθρότητας, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε δερματολόγο.
- Επιλέξτε τις ρυθμίσεις έντασης και τους λειτουργικούς τρόπους σύμφωνα με τον τύπο δέρματος και το επίπεδο ευαισθησίας σας.
- Πριν χρησιμοποιήσετε συσκευές θέρμανσης ή που λειτουργούν σε υψηλή ένταση, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας, ιδίως εάν έχετε δερματική πάθηση ή προβλήματα υγείας.

Βλάβες και συντήρηση:

- Εάν διαπιστώσετε διαρροές, προβλήματα λειτουργίας, ηλεκτρικές εκκενώσεις ή άλλες ζημιές, διακόψτε άμεσα τη χρήση της συσκευής και απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή.
- Για τις επισκευές και την αντικατάσταση ανταλλακτικών, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Αποφύγετε την αυτοτροποποίηση της συσκευής, διότι αυτό μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια και να ακυρώσει την εγγύηση.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την ασφάλεια λειτουργίας, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ανθεκτικότητα των υλικών.

Οδηγίες ασφαλείας

Πριν από τη φόρτιση, ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση. Βεβαιωθείτε ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορείτε να αποσυνδέσετε άμεσα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας. Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, κρατώντας απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλες επιφάνειες και αντικείμενα. Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη φόρτιση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικά, σταθμούς φόρτισης, καλώδια κ.λπ., χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή. Προστατέψτε την περιουσία σας: η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κύτταρα δύσκολα στην κατάσβεση, να έχετε στη διάθεσή σας πλάκα πυρόσβεσης.

Σε περίπτωση μπαταριών LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με επαναφορτιζόμενη μπαταρία LI ION (λιθίου-ιόντος), η οποία λόγω της σύνθεσής της φθείρεται με το χρόνο και κατά τη χρήση. Ο κατασκευαστής αναφέρει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου η συσκευή

Λειτουργεί υπό βέλτιστες συνθήκες και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Στην πραγματικότητα, ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από αυτόν που αναφέρεται στην προσφορά, κάτι που δεν αποτελεί βλάβη της συσκευής, αλλά ιδιότητα του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε τάση κάτω από 3,18 V ή κάτω από το 15% της συνολικής χωρητικότητάς της. Τιμές χαμηλότερες, όπως 2,5 V σε ένα στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε την μπαταρία ή ολοκληρώ τη συσκευή για πάνω από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε τακτικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό, προστατευμένο από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες μέρος.

Σε περίπτωση μπαταριών LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της σύνθεσης, γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και κατά τη χρήση. Ο κατασκευαστής αναφέρει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που αναφέρεται στην προσφορά, και αυτό δεν αποτελεί σφάλμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της κάτω από 3,5 V ή κάτω από το 5% της συνολικής χωρητικότητάς της. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2 V σε ένα κελί, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή τη συσκευή για διάστημα ανώτερο του ενός μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε τακτικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό, προστατευμένο από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες μέρος.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Τα απόβλητα πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να ανακυκλώνονται σε καθορισμένα σημεία. Η κατάλληλη απορρόπηση μπορεί να αποτρέψει πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής των χρησιμοποιημένων συσκευών συμμορφώνεται με τις τοπικές περιβαλλοντικές διατάξεις σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τον δήμο, την εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων ή το κατάστημα αγοράς του προϊόντος.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις λεγόμενες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβαλλοντικής προστασίας, οι οποίες προσδιορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξουδετερωθούν.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

Shenzhen ANLAN Lifie Technology Co., Ltd

2204, Κτήριο 4, Cloud Park Φάση 2, BanTianSt.

518129 Longgang, Shenzhen, Guangdong, Κίνα