


ANLAN

Ηλεκτρική Μασαζιέρα EMS 2 σε 1 ANLAN ANLAN 01 - AMFY51-02A

Εγχειρίδιο χρήσης

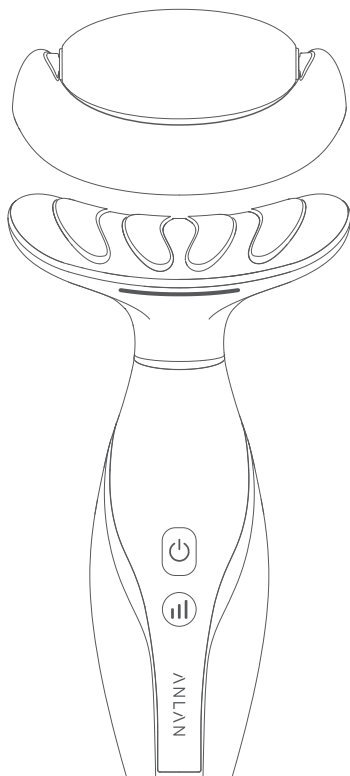

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πολυπολικό προϊόν φροντίδας ANLAN. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης λειτουργεί επίσης ως έγγραφο εγγύησης, γι' αυτό παρακαλούμε φυλάξτε το.



Οδηγίες ασφαλείας

Πριν από τη χρήση της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

 Προειδοποιήσεις	 Πληροφορίες
	* Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή ταυτόχρονα με τα ακόλουθα ηλεκτρικά ιατρικά μέσα. ηλεκτρικές. Μικρά ηλεκτρομαγνητικά εμφυτεύματα, όπως καρδιακές μπαταρίες. • Μικρά ηλεκτρομαγνητικά εμφυτεύματα, όπως καρδιακές μπαταρίες. • Ιατρικές ηλεκτρονικές συσκευές υποστήριξης ζωής, όπως τεχνητή καρδιά ή μεσο-τεχνητός πνεύμονας. • Φορητές ιατρικές ηλεκτρονικές συσκευές, όπως ηλεκτροκαρδιογράφος.

 Προειδοποιήσεις Ασφάλεια	* Τα παρακάτω άτομα πρέπει να συμβουλευτούν τον ιατρό τους πριν από τη χρήση. • Έγκυες γυναίκες • Άτομα με οξείες (επώδυνες) παθήσεις • Άτομα που πάσχουν από φυματίωση (TBC) • Άτομα με νευραλγία του προσωπικού νεύρου • Άτομα με καρδιακές παθήσεις • Άτομα με κακοήθεις νεοπλασίες • Άτομα με μη φυσιολογική αρτηριακή πίεση • Άτομα με μεταδοτικές ασθένειες • Άτομα με αιμορροφιλία • Άτομα με πυρετώδεις παθήσεις • Άτομα με αλλεργίες • Άτομα με μεταδοτικές ασθένειες • Άτομα με δερματικές παθήσεις, όπως ατοπική δερματίτιδα και δερματίτιδα εξ επαφής • Άτομα με διαταραχές της αισθητικότητας που πάσχουν από σοβαρές περιφερειακές αγγειακές παθήσεις ή κυκλοφορικές διαταραχές, για παράδειγμα λόγω σακχαρώδους διαβήτη
--	---


Παρουσίαση του προϊόντος

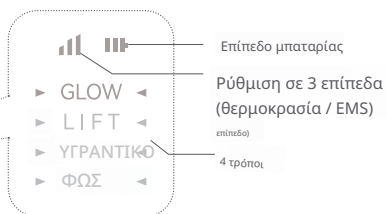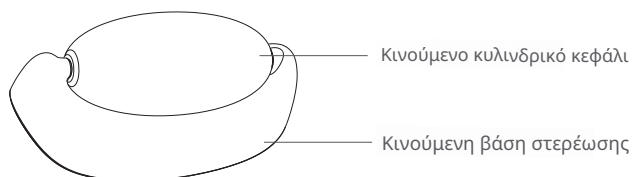


Ψηφιακή οθόνη

Κουμπί ενεργοποίησης / λειτουργίας

Κουμπί επιπέδου / φωτισμού

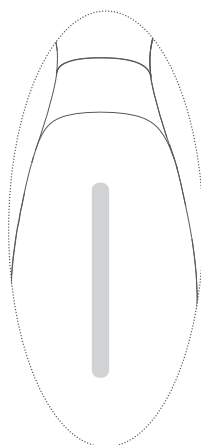

Πίσω λουράκι ηλεκτροδίου σε ασημί χρώμα

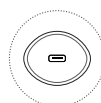


Υποδοχή φόρτισης


Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο	MF01
Ισχύς προϊόντος	6W
Βάρος κύριας μονάδας	Περίπου 90 g
Βάρος νεφρίτη	Περίπου 82 g
Διαστάσεις κύριας μονάδας	Περίπου 83,5 x 45 x 142,5 mm
Διαστάσεις αξεσουάρ	Περίπου 87 x 31 x 44 mm
Χωρητικότητα μπαταρίας	1500 mAh
Χρόνος φόρτισης	Περίπου 2 ώρες
Χρόνος λειτουργίας	Περίπου 2 ώρες
Χρονόμετρο	Περίπου 5 λεπτά
Θερμοκρασία θερμής κομπρέσας	Περίπου 42 °C ± 3 °C
Φωτισμός	Μωβ φωτισμός, μπλε φωτισμός, τirkουάζ φωτισμός, πράσινος φωτισμός, κίτρινος φωτισμός, πορτοκαλί φωτισμός, κόκκινος φωτισμός
Είσοδος	DC5V/1A
Υποδοχή φόρτισης	Type-C
Εγγύηση	1 έτος

Περιεχόμενα συσκευασίας

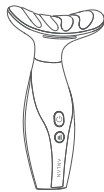

Κύρια μονάδα × 1

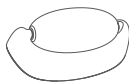

Ρολλερ κεφαλή × 1



Εγχειρίδιο χρήσης × 1



Καλώδιο φόρτισης × 1

Χρήση του προϊόντος

Εισαγωγή λειτουργίας και επιπέδου:

【 Λειτουργία GLOW 】

Θερμότητα + δόνηση + κόκκινο φως (5 λεπτά)

1. επίπεδο, 42 °C + ασθενής δόνηση (σε επαφή με ανθρώπινο σώμα) + κόκκινο φως
2. επίπεδο, 42 °C + μέτρια δόνηση (σε επαφή με ανθρώπινο σώμα) + κόκκινο φως
3. επίπεδο, 42 °C + δόνηση υψηλής συχνότητας (σε επαφή με ανθρώπινο σώμα) + κόκκινο φως

【 Λειτουργία LIFT 】

Μικρορεύμα + πράσινο φωτισμός (5 λεπτά)

1. επίπεδο, μικρορεύμα 1 + πράσινο φωτισμός
2. Επίπεδο, μικρορεύμα 2 + πράσινο φωτισμός
- Επίπεδο 3, μικρορεύμα 3 + πράσινο φωτισμός

【 Λειτουργία ΥΓΡΑΣΙΑΣ 】

Θερμότητα + δόνηση + ανιόντα + πορτοκαλί φωτισμός (5 λεπτά)

- Επίπεδο 1, 42 °C + ήπια δόνηση (έπειτα από επαφή με το ανθρώπινο σώμα) + ανιόντα + πορτοκαλί φωτισμός
- Επίπεδο 2, 42 °C + μέτρια δόνηση (έπειτα από επαφή με το ανθρώπινο σώμα) + ανιόντα + πορτοκαλί φωτισμός
- Επίπεδο 3, 42 °C + δόνηση υψηλής συχνότητας (έπειτα από επαφή με το ανθρώπινο σώμα) + ανιόντα + πορτοκαλί φωτισμός

【 Λειτουργία LIGHT 】

Θερμότητα + 7 χρώματα φωτός (ιώδες, μπλε, τικουάζ, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο)

Είναι διαθέσιμη θερμοκρασία 42 °C συν 7 χρώματα φωτός, με προεπιλεγμένο φωτισμό το ιώδες. Πατήστε το κουμπί μία φορά

για την ενεργοποίηση του επόμενου φωτός. Μετά από κάθε αλλαγή φωτισμού, το χρονόμετρο επανεκκινείται.

Οδηγίες χρήσης

1. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

Ενεργοποίηση: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  » για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η συσκευή εκπέμπει έναν ηχητικό τόνο, το Οι ενδεικτικές λυχνίες επιπέδου και τάσης τροφοδοσίας ανάβουν, και εμφανίζεται το πραγματικό επίπεδο της μπαταρίας καθώς και το τρέχον επίπεδο. Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι «GLOW» και «Επίπεδο 1». Το προϊόν διαθέτει μνήμη, που σημαίνει ότι όταν ενεργοποιείται ξανά η συσκευή, αυτή εισέρχεται αυτόματα στη λειτουργία και το επίπεδο που είχε οριστεί κατά την τελευταία απενεργοποίηση.

Απενεργοποίηση:

- α. Πατήστε παρατεταμένα το  « » για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η συσκευή εκδίδει ένα ηχητικό σήμα και όλες οι ενδείξεις απενεργοποιούνται.
- β. Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας πέσει κάτω από 5%, η συσκευή εκπέμπει τρεις ηχητικές ειδοποιήσεις (περίπου 3 δευτερόλεπτα), στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα και όλες οι ενδείξεις σβήνουν.
- γ. Εάν δεν εκτελεστεί καμία ενέργεια εντός 5 λεπτών, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα, εκπέμποντας μία μονοτονική ηχητική ειδοποίηση, και όλες οι ενδείξεις σβήνουν.
- δ. Εάν ανιχνευθεί φόρτιση, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα, εκπέμποντας μία μονοτονική ηχητική ειδοποίηση, και όλες οι ενδείξεις φωτός σβήνουν.

2. Σχετικά με τους λειτουργικούς τρόπους:

Για να αλλάξετε ανάμεσα στους τρόπους, πατήστε σύντομα το κουμπί „“. Κατά την αλλαγή των τρόπων, η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα. Η σειρά αλλαγής των τρόπων από πάνω προς τα κάτω είναι: GLOW, LIFT, ΥΓΡΑΝΤΙΚΟ, LIGHT. Μετά τη λήξη του ρυθμιζόμενου χρόνου εφαρμογής κάθε τρόπου, η συσκευή εκπέμπει δύο ηχητικά σήματα και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.


3. Για τη λειτουργία των επιπέδων:

α. Σε λειτουργίες „GLOW“, „LIFT“ και „ΥΓΡΑΝΤΙΚΟ“, πατήστε το „“.

 Πατήστε το πλήκτρο „“ για την εναλλαγή των επιπέδων. Κατά την αλλαγή των επιπέδων,

η συσκευή εκπέμπει έναν ήχο. Η σειρά εναλλαγής των επιπέδων είναι: 1>2>3.

β. Σε λειτουργία „LIGHT“, η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι „μωβ φως“, και η σειρά εναλλαγής είναι „μωβ“, „μπλε“, „τιρκουάζ“, „πράσινο“, „κίτρινο“, „πορτοκαλί“, „κόκκινο“. Πατήστε το πλήκτρο „“ μία φορά για να εναλλάξετε το φως στο επόμενο χρώμα. Με κάθε εναλλαγή του φωτός, το χρονόμετρο επανεκκινεί. Μετά από 5 λεπτά, η συσκευή εκπέμπει δύο ηχητικά σήματα, υποδεικνύοντας το τέλος της περιποίησης δέρματος και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.

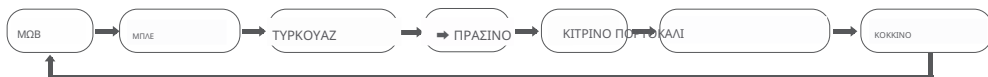

4. Σχετικά με τη διαδικασία φόρτισης: κατά τη φόρτιση, το ενδεικτικό φωτάκι της τροφοδοσίας παραμένει αναμμένο, ενώ η τρέχουσα ζώνη τροφοδοσίας αναβοσβήνει.

5. Σχετικά με τη συναρμολόγηση του σετ κυλίνδρων:





α. Προτού προβείτε στη συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι η κύρια μονάδα της συσκευής και τα εξαρτήματα κυλίνδρου είναι καθαρά και απαλλαγμένα από υπολείμματα εσάνς, προκειμένου να αποφευχθεί ολίσθηση.

β. Ανασηκώστε το κυλινδρικό εξάρτημα και ευθυγραμμίστε τον άξονα του κυλίνδρου, ο οποίος συνδέει τον κύλινδρο με τη διεπαφή στερέωσης της συσκευής, στο κέντρο. Λάβετε υπόψη τη φορά κύλισης, ώστε να διασφαλίσετε ότι ο κύλινδρος θα περιστρέφεται χωρίς εμπόδια.

γ. Σπρώξτε προσεκτικά τον άξονα του κυλίνδρου στη διεπαφή στερέωσης της κονσόλας έως ότου ακουστεί ένα 'κλικ', που υποδηλώνει ότι ο κύλινδρος έχει ασφαλώς τοποθετηθεί στην κονσόλα. Έπειτα, ανακινήστε προσεκτικά τον κύλινδρο για να επιβεβαιώσετε ότι είναι σταθερά στερεωμένος και δεν παρουσιάζει χαλαρότητα.

δ. Μετά τη συναρμολόγηση, ελέγξτε ξανά ότι ο κύλινδρος έχει στερεωθεί κατάλληλα και περιστρέφεται ομαλά.

Εάν ο κύλινδρος δεν περιστρέφεται ομαλά ή εμφανίζει χαλαρότητα, πιθανώς υποδηλώνει λανθασμένη τοποθέτηση. Παρακαλούμε επανατοποθετήστε σύμφωνα με τα προηγούμενα βήματα.

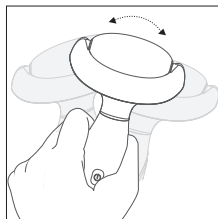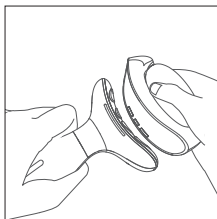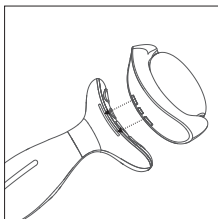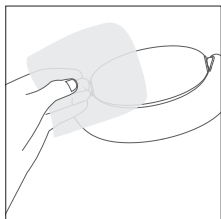

Συμβουλές περιποίησης δέρματος


Μετά τη δοκιμή, οι προτεινόμενοι χρόνοι χρήσης για κάθε λειτουργία είναι οι εξής:

1. Λειτουργία GLOW – περίπου 5 λεπτά
2. Λειτουργία LIFT – περίπου 5 λεπτά
3. Λειτουργία ΥΓΡΑΣΙΑΣ – περίπου 5 λεπτά
4. Λειτουργία LIGHT – περίπου 5 λεπτά
5. Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με ορό περιποίησης προσώπου. Για κανονικό δέρμα, η λειτουργία LIFT προτείνεται 2-3 φορές εβδομαδιαίως. Οι λειτουργίες GLOW, ΥΓΡΑΣΙΑΣ και LIGHT μπορούν να εφαρμόζονται καθημερινά.

Πριν από τη χρήση



Πριν από την πρώτη χρήση, συνιστάται να δοκιμάσετε τη συσκευή στο μπράτσο σας. Προτού παραμείνετε χωρίς χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα, δοκιμάστε το δέρμα σας με τονωτικό, λοσιόν ή κρέμα μαζι.

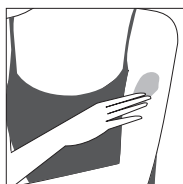

1. Πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι και στη συνέχεια σκουπίστε τα με καθαρή πετσέτα.




2. Επιλέξτε τη λειτουργία GLOW, εφαρμόστε τα προϊόντα περιποίησης δέρματος στο χέρι και κάντε μασάζ για ένα λεπτό.



3. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με απόλυτη ασφάλεια.


【 Φροντίδα Αυχένα 】

- ① Καθαρίστε και πλύνετε πρώτα τον αυχένα σας.
- ② Εφαρμόστε τονωτικό, λοσιόν ή εκχύλισμα στον αυχένα σας.
- ③ Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα και επίπεδο μασάζ, στη συνέχεια κάντε μασάζ στον αυχένα σας. Μετά τη χρήση, καθαρίστε την κεφαλή μασάζ με πετσέτα ή χαρτομάντιλο.

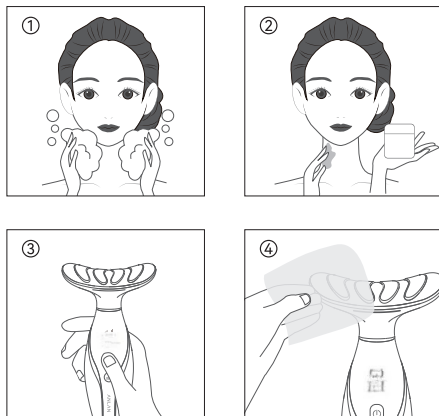



【 Φροντίδα επιδερμίδας προσώπου 】

- ① Καθαρίστε και πλύνετε πρώτα το πρόσωπό σας.
- ② Εφαρμόστε τονωτικό, λοσιόν ή ορό στο πρόσωπό σας.
- ③ Επιλέξτε την απαιτούμενη λειτουργία και επίπεδο μασάζ, κατόπιν κάντε μασάζ στο πρόσωπό σας. Μετά τη χρήση, καθαρίστε την κεφαλή μασάζ με πετσέτα ή χαρτομάντιλο.

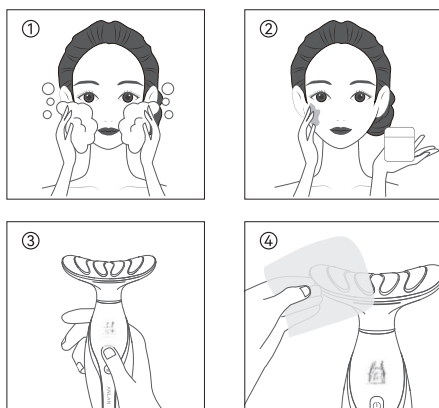

【 Τεχνική μασάζ προσώπου 】

- ① Από τη μύτη προς το μέτωπο.
- 2 Από τη βάση του μετώπου προς τα πάνω.
- ③ Από το πρόσωπο προς τα έξω, από μέσα προς τα έξω
- ④ Από το ζυγωματικό προς τα πάνω, προς την κατεύθυνση των ζυγωματικών

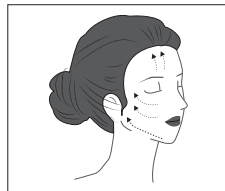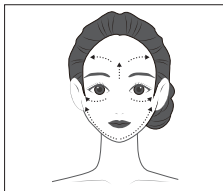



【 Μέθοδος μασάζ αυχένα 】

• Από μέσα προς τα έξω


- Από μέσα προς τα πάνω, από κάτω προς τα επάνω
- Από την κορυφή του αυχένα προς το ζυγωματικό
- Και από τις δύο πλευρές, από κάτω προς τα πάνω



* Κατά τη χρήση της λειτουργίας ΥΓΡΑΣΙΑΣ το χέρι πρέπει να έρχεται σε επαφή με την πίσω αγωγή ταινία.

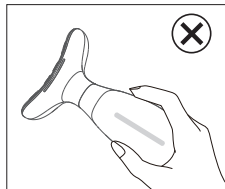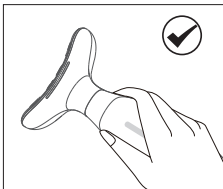

【 Οδηγίες χρήσης κυλιόμενου μασάζ 】

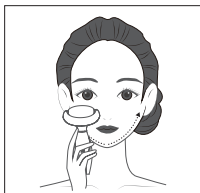

Μασάζ προσώπου



Μασάζ μετώπου



Μασάζ ζυγωματικών



Μασάζ αυχένα



Μασάζ χεριών

Ε: Γιατί δεν μπορώ να ενεργοποιήσω τη συσκευή;

Α: Η μπαταρία έχει χαμηλή στάθμη. Παρακαλείσθε να φορτίσετε τη μπαταρία πριν από τη χρήση. Η μπαταρία έχει εξαντληθεί. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών για την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση της μπαταρίας.

Ε: Γιατί δεν φορτίζεται η συσκευή;

Α: Λόγω χρήσης ακατάλληλου φορτιστή· παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε φορτιστή ή power bank με έξοδο 5V.

Ε: Ποιος είναι ο συνιστώμενος χρόνος χρήσης; Μπορεί να χρησιμοποιείται ημερησίως;

Α: Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή, συνιστάται να εφαρμόζεται για 5-10 λεπτά κάθε φορά.

Σε κανονικό δέρμα, συνήθως συνιστάται η χρήση 2-3 φορές εβδομαδιαίως.

Ε: Μπορεί η συσκευή να χρησιμοποιηθεί σε μπανιέρα;

Α: Όχι, αυτό το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο και η χρήση του σε μπανιέρα ή κατά το ντους απαγορεύεται.

Ε: Γιατί είναι απαραίτητη η χρήση τζελ ή προϊόντων περιποίησης δέρματος;

Α: Με αυτόν τον τρόπο το μικρορεύμα διεισδύει πιο αποτελεσματικά και η ενέργεια μεταφέρεται στα βαθύτερα στρώματα του δέρματος για βέλτιστο αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα μειώνει την τριβή του δέρματος για την αποτροπή βλάβης του δέρματος.

Ε: Ποια προϊόντα περιποίησης δέρματος επιτρέπεται να χρησιμοποιώ;

Α: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορούς, ενυδατικές κρέμες και τζελ.

Ε: Είναι φυσιολογικό να νιώθω αίσθηση ηλεκτρικού σοκ κατά τη διάρκεια της χρήσης;

Α: Τα προϊόντα EMS που εφαρμόζουν τεχνολογία μικρορεύματος χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα χαμηλής συχνότητας, το οποίο διαπερνά το δέρμα και τους μυϊκούς ιστούς του προσώπου, αποστέλλοντας ήπιους παλμούς για τη διέγερση της περιοχής. Έχει αποδειχθεί ότι το μικρορεύμα διεγείρει την παραγωγή ATP, ενισχύει τη ζωτικότητα των μυών του προσώπου και προάγει την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης. Αυτή είναι μια απολύτως φυσιολογική κατάσταση.

Ε: Έχω αλλεργικό δέρμα, μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτήν τη συσκευή;

Α: Ναι, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε. Για χρήστες με ευαίσθητο δέρμα συνιστάται η αραιότερη χρήση. Συνιστάται η εφαρμογή μία φορά την εβδομάδα της χρήσης.

Ερώτηση: Είναι φυσιολογικό το δέρμα μου να εμφανίζει ελαφρά κοκκινίλα μετά τη χρήση;

Απάντηση: Η αίσθηση θερμότητας και δόνησης κατά τη χρήση είναι φυσιολογική και υποχωρεί εντός σύντομου χρονικού διαστήματος. Εάν το δέρμα δεν επανέλθει στην κανονική του κατάσταση ή παρουσιαστούν άλλες ανεπιθύμητες αντιδράσεις, απευθυνθείτε άμεσα σε ιατρό.

Αυτή η τεκμηρίωση αποτελεί μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης που έχει συντάξει ο κατασκευαστής.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρισμός) από τον χρήστη ή σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό συνεργείο με ευθύνη και έξοδα του χρήστη. Εφόσον στις οδηγίες χρήσης δεν περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τις απαιτούμενες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή τεχνικού ελέγχου, η φυσική κατάσταση του προϊόντος θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, σε σύγκριση με την κατάσταση ενός νέου προϊόντος. Εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή τεχνικής υποστήριξης. Η κατάλληλη συντήρηση (καθαρισμός) και η άμεση ανταπόκριση σε αλλαγές της κατάστασης είναι απαραίτητες, καθώς η παράλειψή τους μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις παρεχόμενες οδηγίες.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος βλάβης του προϊόντος:

- Χρησιμοποιείτε τις συσκευές αποκλειστικά σύμφωνα με τον προορισμό τους, αποφεύγοντας οποιαδήποτε χρήση αντίθετη με τις οδηγίες.
- Οι μη αδιάβροχες συσκευές δεν πρέπει να βυθίζονται σε νερό ούτε να χρησιμοποιούνται υπό συνθήκες υψηλής υγρασίας.
- Μην εκθέτετε τα προϊόντα σε ακραίες θερμοκρασίες και αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεσή τους στον ήλιο.
- Για τις συσκευές με μπαταρία, διασφαλίστε ότι η φόρτιση πραγματοποιείται αποκλειστικά με το παρεχόμενο καλώδιο ή με συμβατό αντάπτορα.

Κίνδυνος για τον χρήστη:

- Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σε ερεθισμένο, κατεστραμμένο δέρμα, ανοιχτά τραύματα, ενεργή φλεγμονή ή αλλεργικές αντιδράσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε συσκευές που εκπέμπουν μικρορεύμα, υπερήχους ή θερμότητα εάν φέρετε βηματοδότη, μεταλλικό εμφύτευμα ή είστε έγκυος.
- Εάν παρουσιαστεί ευαισθησία, δυσφορία ή άλλα ανησυχητικά συμπτώματα, διακοψτε αμέσως τη χρήση της συσκευής και επικοινωνήστε με δερματολόγο.

Πληροφορίες για τη ορθή χρήση

Συστάσεις χρήσης:

- Πριν από τη χρήση συσκευών όπως το μασάζ ή η «ηλεκτρική απορροφητική συσκευή» για το μoustάκι, καθαρίστε σχολαστικά το πρόσωπό σας και εφαρμόστε κατάλληλα καλλυντικά (π.χ. τζελ ή νερό) για την υποστήριξη της θεραπείας.
- Οι συσκευές βαθύ καθαρισμού, όπως οι κυσταλλικοί δερματικοί απολεπιστές με υπερηχητική τεχνολογία, πρέπει να χρησιμοποιούνται το πολύ 2-3 φορές την εβδομάδα για την αποφυγή υπερβολικής ερεθιστικότητας του δέρματος.
- Χρησιμοποιείτε τις συσκευές σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και μην υπερβαίνετε τον συνιστώμενο χρόνο εφαρμογής σε κάθε περιοχή του προσώπου (συνήθως 1-2 λεπτά).
- Επιλέξτε το κατάλληλο επίπεδο έντασης, ιδιαίτερα εάν το δέρμα σας είναι ευαίσθητο.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Καθαρίστε τη συσκευή με υγρό πανί ή άλλο μέσο, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, μετά από κάθε χρήση. Ξεπλύνετε τις αδιάβροχες συσκευές κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των εξαρτημάτων, όπως οι βούρτσες ή οι κεφαλές τρίψιμου, και αντικαταστήστε τα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

- Αποθηκεύετε τις συσκευές σε ξηρό και καθαρό χώρο, αποφεύγοντας την επαφή με υγρασία και σκόνη.

Περαιτέρω Προφυλάξεις

Προσαρμογή στον χρήστη:

- Επιλέξτε τη συσκευή που ανταποκρίνεται στον τύπο του δέρματός σας και τις ατομικές ανάγκες σας. Λειτουργίες όπως η θέρμανση ή το μασάζ με μικρορεύμα ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για ευαίσθητο δέρμα ή δέρμα με αγγειακά προβλήματα.
- Άτομα με δερματολογικά προβλήματα, όπως ροδόχρωση, πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο κατόπιν ιατρικής σύστασης.

Βλάβη και Σέρβις:

- Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε ζημιά στη συσκευή (π.χ. ρωγμές στην εξωτερική επιφάνεια, προβλήματα λειτουργίας ή ασταθή λειτουργία), διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το επίσημο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή.
- Για την αντικατάσταση των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τα αυθεντικά ανταλλακτικά που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
- Ελέγχετε τακτικά τη λειτουργία των επαναφορτιζόμενων συσκευών και φορτίζετε τις σύμφωνα με τις συστάσεις, προκειμένου να αποφευχθεί η υποβάθμιση της απόδοσης ή ο κίνδυνος βλάβης.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ασφάλεια λειτουργίας, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ανθεκτικότητα των υλικών.

Μέτρα Ασφαλείας

Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση ή τη φόρτιση. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε άμεσα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, διατηρώντας απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα. Μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή. Να είστε προσεκτικοί με την περιουσία σας· η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν· εφοδιαστείτε με πυροσβεστήρα.

Σε περίπτωση μπαταριών LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με επαναφορτιζόμενη μπαταρία LI-ION (λιθίου-ιόντων), η οποία λόγω της τελικής και χημικής της σύνθεσης γεννά με το χρόνο και τη χρήση. Ο κατασκευαστής παρέχει την μέγιστη διάρκεια λειτουργίας υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου η συσκευή λειτουργεί σε βέλτιστες συνθήκες και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Στην πραγματικότητα, ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από αυτόν που αναφέρεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί βλάβη της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της σε τάση μικρότερη από 3,18 V ή κάτω από το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Τάσεις μικρότερες, όπως 2,5 V σε ένα κελί, προκαλούν μόνιμη βλάβη που δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε την μπαταρία ή τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε τακτικά το επίπεδο φόρτισής της ανά δύο μήνες. Φυλάσσετε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από ηλιακή ακτινοβολία και χαμηλές θερμοκρασίες.

Σε περίπτωση μπαταριών LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με LI PO (λίθιο-πολυμερική) μπαταρία, η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της σύνθεσης, γηράσκει με το χρόνο και κατά τη χρήση. Ο κατασκευαστής αναφέρει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου η συσκευή

Λειτουργεί υπό βέλτιστες συνθήκες και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα ενδέχεται να διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην προσφορά και αυτό δεν οφείλεται σε βλάβη της συσκευής, αλλά αποτελεί χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της κάτω από 3,5 V ή κάτω από το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Τιμές χαμηλότερες, όπως 3,2 V σε ένα κελί, τη βλάπτουν μόνιμα, και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή την ολόκληρη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε τακτικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Φυλάσσετε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από ηλιακή ακτινοβολία και χαμηλές θερμοκρασίες.

Προστασία Περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα, επισημασμένα σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά αστικά απορρίμματα. Τα απόβλητα πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να ανακυκλώνονται σε καθορισμένα σημεία. Η κατάλληλη διάθεση μπορεί να αποτρέψει πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών συμμορφώνεται με τις τοπικές περιβαλλοντικές διατάξεις για την διαχείριση αποβλήτων. Πλήρεις πληροφορίες σχετικά με το παρόν θέμα παρέχονται στον δήμο, στον χώρο διαχείρισης αποβλήτων ή στο κατάστημα αγοράς του προϊόντος.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις λεγόμενες Οδηγίες Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ασφάλεια, την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος, που ορίζουν τους κινδύνους προς εντοπισμό και εξάλειψη.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Biedowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

LTI Testing & Certification France S.A.S.

Rue de Rome 154 None None

13006 Μασσαλία, Γαλλία

info@lti-lab.com

Εκπρόσωπος της ΕΕ:

LTI Testing & Certification France S.A.S.

Rue de Rome 154 None None

13006 Μασσαλία, Γαλλία

info@lti-lab.com



Μπαταρία προϊόντος
Προδιαγραφές

Λειτουργία	Τιμή
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Μπαταρία λιθίου-ιόντος με μία κυψέλη
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0,002% Cd, >0,004% Pb)	Μην
Καθαρό βάρος (kg)	0.0192
Χωρητικότητα (mAh)	1000mAh