


ANLAN

Συσκευή αποτρίχωσης

Εγχειρίδιο χρήσης

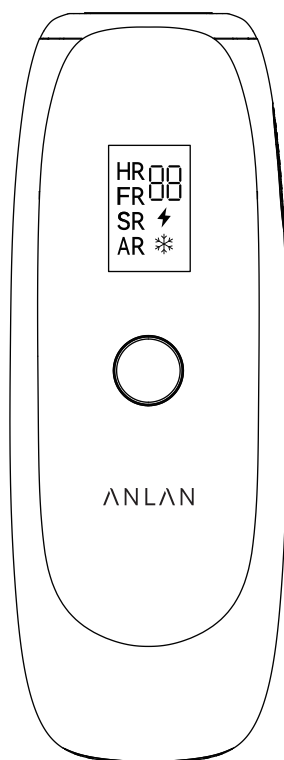


Σας ευχαριστούμε για την αγορά της συσκευής αποτρίχωσης ANLAN LumaIce. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά — το εγχειρίδιο αυτό λειτουργεί επίσης ως κάρτα εγγύησης.

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και οι σημάνσεις στο προϊόν έχουν σχεδιαστεί για να σας υποστηρίξουν στη σωστή και ασφαλή χρήση της συσκευής, καθώς και να αποτρέψουν τυχόν σωματικούς τραυματισμούς ή ζημιές στην ιδιοκτησία. Παρακαλούμε διαβάστε και κατανοήστε πλήρως το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου.

Κίνδυνος

- **Αποφυγή περιοχών των οφθαλμών:** Μην χρησιμοποιείτε κοντά στα μάτια. Το ισχυρό φως μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμες βλάβες.
- **Εσωτερικά εξαρτήματα:** Μην αγγίζετε τα εσωτερικά μέρη εάν το προϊόν είναι κατεστραμμένο, για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.
- **Εισαγωγή αντικειμένων:** Μην εισάγετε κανένα αντικείμενο στο προϊόν και μην το τοποθετείτε επιτόλαια.
- **Αερισμός:** Μην φράσσετε τις οπές αερισμού για την αποφυγή καπνού και πυρκαγιάς.
- **Μαγνητικά αντικείμενα:** Κρατήστε την οπή ακτινοβολίας μακριά από αντικείμενα που μπορεί να απομαγνητιστούν, για την αποφυγή βλαβών.
- **Χρήση χωρίς επίβλεψη:** Μην αφήνετε το προϊόν αναμμένο χωρίς επίβλεψη. Απενεργοποιήστε το αμέσως μετά τη χρήση.
- **Ξηρές συνθήκες:** Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά σε ξηρό περιβάλλον. Κρατήστε το προϊόν και τον τροφοδοτικό προσαρμογέα μακριά από πηγές νερού και διατηρήστε τα στεγνά.
- **Λειτουργία ανεμιστήρα:** Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν ο ενσωματωμένος ανεμιστήρας δεν λειτουργεί (δεν ακούγεται ο ήχος από τις λεπίδες του ανεμιστήρα), ώστε να αποφευχθεί το κάπνισμα και η βλάβη.
- **Εύφλεκτα υλικά:** Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά (π.χ. δοχεία αεροζόλ, βενζινάδικα) για την αποφυγή πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
- **Θερμοκρασία λειτουργίας:** Η συσκευή λειτουργεί σε θερμοκρασίες από +5 °C έως +40 °C. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη θερμοκρασία του χώρου.
- **Διαφορά θερμοκρασίας:** Εάν η διαφορά θερμοκρασίας υπερβαίνει τους 20 βαθμούς (μεταφορά από χώρο με χαμηλή θερμοκρασία σε θερμό ή αντίστροφα), απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε την χρησιμοποιηθεί για 2 ώρες πριν από επαναχρησιμοποίηση.

- **Κατάσταση υγείας:** Χρησιμοποιείτε το προϊόν υπό επίβλεψη, εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας (σωματικά, αισθητηριακά ή ψυχικά) ή βρίσκεστε υπό θεραπεία για δερματικές παθήσεις.
- **Παιδιά:** Μην επιτρέπετε στα παιδιά να αγγίζουν το προϊόν.
- **Αιχμηρά αντικείμενα:** Μην αγγίζετε το προϊόν με αιχμηρά ή θερμαινόμενα αντικείμενα.
- **Πυρκαγιά:** Μην πετάτε το προϊόν στη φωτιά.
- **Έκθεση σε νερό:** Αποφύγετε την έκθεση του δέρματος σε νερό για 2 ώρες μετά τη χρήση, καθώς και την έκθεση σε υπερβολή ακτινοβολία για 24 ώρες.
- **Καλώδιο τροφοδοσίας:** Μην καταστρέψετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Αποφύγετε το δίπλωμα, τη στρέψη ή την έκθεση του σε υψηλές θερμοκρασίες. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν το καλώδιο είναι φθαρμένο.
- **Μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις:** Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν χωρίς άδεια.
- **Αδιαβροχοποίηση:** Αυτό το προϊόν δεν είναι αδιαβροχο. Μην το χρησιμοποιείτε στο μπάνιο.
- **Πηγές φωτιάς:** Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε πηγές φωτιάς, πηγές υψηλής θερμοκρασίας ή σε υγρά αντικείμενα. Μην το φυλάσσετε στο μπάνιο.
- **Φωτεινή κεφαλή:** Μην κατευθύνετε τη φωτεινή κεφαλή προς τα μάτια για να αποφύγετε βλάβες στην όραση. Μην εκτεθείτε σε ακτινοβολία ρούχα, μαλλιά ή άλλα αντικείμενα, για να αποφευχθεί η φθορά τους.
- **Κατοικίδια ζώα:** Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε κατοικίδια ζώα, ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί.
- **Προστατευτικά γυαλιά:** Φοράτε τα παρεχόμενα προστατευτικά γυαλιά κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- **Πόνος ή δυσφορία:** Αν νιώσετε πόνο ή δυσφορία, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος.

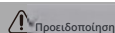

Προειδοποίηση

- **Συμβουλευτείτε γιατρό:** Εάν δεν είστε βέβαιοι για την κατάλληλότητα του προϊόντος για εσάς, ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- **Σκούρο δέρμα:** Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχετε φυσιολογικά σκούρο δέρμα.
- **Χρωματισμός δέρματος:** Η συσκευή στοχεύει στις μελανίνες της τρίχας. Η χρήση σε σκούρο δέρμα μπορεί να προκαλέσει ερυθράματα, φουσκάλες και αλλοιώσεις του χρώματος του δέρματος.
- **Έκθεση στον ήλιο:** Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά από ηλιοθεραπεία υπό τον ήλιο.
- **Δέρμα καμένο από τον ήλιο:** Το δέρμα που έχει καεί από τον ήλιο περιέχει αυξημένη μελανίνη. Η χρήση της συσκευής σε πρόσφατα καμένο από τον ήλιο δέρμα αυξάνει τον κίνδυνο εγκαυμάτων, φουσκάλων και αλλοιώσεων του χρώματος του δέρματος.

Αρχή λειτουργίας του προϊόντος

Έντονο παλμικό φως (IPL) είναι μια μη συνεκτική πηγή φωτός, αποτελούμενη από μονή ή πολλαπλή ακολουθία παλμών. Πρόκειται για μη συνεκτικό φως με ευρύ φασματικό εύρος και υψηλή ενεργειακή πυκνότητα.

Μέσω της χρήσης φίλτρων ή επιστρώσεων προστασίας, το φως με μικρότερα μήκη κύματος μπορεί να φιλτραριστεί, με φασματικό εύρος από 560 nm έως 1200 nm. Η πηγή φωτός στις συσκευές IPL είναι η λυχνία ξενόνου. Η βασική αρχή λειτουργίας βασίζεται στην εφαρμογή υψηλής τάσης από έναν πυροδότη για την ιονισμό του αερίου ξενόνου. Μετά τη φόρτιση του πυκνωτή αποθήκευσης ενέργειας για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, η εκφόρτιση πραγματοποιείται σε εξαιρετικά σύντομο χρόνο, προκαλώντας εκτεταμένη ιονισμό του αερίου ξενόνου μέσα στη λυχνία. Το ξενονικό αέριο μετατρέπεται την αποθηκευμένη ενέργεια σε έντονη ακτινοβολία φωτός και την απελευθερώνει. Αυτή η διαδικασία εκφόρτισης αποτελεί έναν παλμό φωτός.

Η τρίχα έχει κύκλο ανάπτυξης, ο οποίος μπορεί να διαχωριστεί κατά προσέγγιση στις φάσεις αναγέννησης (ανάπτυξης), καταγέννησης (υποστροφής) και τελογέννησης (ηρεμίας). Η τρίχα στη φάση αναγέννησης παρουσιάζει πλήρη δομή, συμπεριλαμβανομένου του θυλακίου τρίχας. Τα θυλάκια τρίχας στους Ασιάτες συνήθως περιέχουν μελανίνη και είναι κατά βάση μαύρα. Οι τρίχες στις φάσεις καταγέννησης και τελογέννησης συνήθως δεν διαθέτουν δομή θυλακίου τρίχας. Η απομάκρυνση της πτεονόζουσας τρίχας βασίζεται σε αυτήν την ανατομική ιδιαιτερότητα της τρίχας. Το IPL με καθορισμένο βάθος διείσδυσης και μήκος κύματος, το οποίο απορροφάται αποτελεσματικά από τη μελανίνη, χρησιμοποιείται για την ακτινοβολήση των τριχών. Το λέπι της τρίχας απορροφά μεγάλη ποσότητα φωτεινής ενέργειας, η οποία μετατρέπεται σε θερμότητα και μεταφέρεται στο θύλακα της τρίχας μέσω των πρωτεϊνών εντός της τρίχας. Ολόκληρη η τρίχα θερμαίνεται, προκαλώντας φλεγμονή των πρωτεϊνών και νέκρωση των κυττάρων μέσω πήξης. Τελικά, λόγω της νέκρωσης των κυττάρων ανάπτυξης, η τρίχα πέφτει

Αντενδείξεις χρήσης

- Άτομα που λαμβάνουν φωτοευαίσθητα φάρμακα για φωτισμό με μήκη κύματος από 560 nm έως 1200 nm.
- Άτομα με ιστορικό επιληψίας ή φωτοδερματίτιδας.
- Άτομα με υποψία κακοήθων δερματικών όγκων.
- Άτομα που πρόσφατα εκτέθηκαν σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία ή δεν μπορούν να αποφύγουν την έκθεση στον ήλιο μετά από χειρουργική επέμβαση.
- Άτομα με προδιάθεση για σχηματισμό χηλοειδικών ουλών.


Γεννημένος με πτερύγια	Γύρω από το στόμα και τα μάτια	Φλεγμονώδεις δερματικές αλλοιώσεις με πύον
Φλύκταινα	Κνησμός και αίσθημα καύσου. Δερματικές αλλοιώσεις	Γεννητικά και πρωκτικά σημεία.
Μεγάλες φλέβες, αιμορροΐδες.	Αυξημένα τριχίδια, Κηλίδες φακίδων	Περιοχές με φλεγμονή που οφείλεται σε εγκαύματα ή
ερεθισμό του δέρματος Μαστοί, γαλακτοφόροι αδένες	Ιογενείς βλάβες	Περιοχές με έκζεμα ή φλεγμονώδεις δερματικές αλλοιώσεις με εξίδρωση

Προσοχή: Η παρούσα λίστα δεν είναι εξαντλητική. Εάν δεν είστε βέβαιος/α για το αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, συμβουλευτείτε ιατρό.


Εισαγωγή του προϊόντος

Κύρια εξαρτήματα και λειτουργίες

Εμφανιζόμενη οθόνη

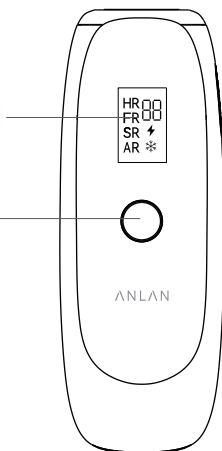


Κουμπί εκπομπής λάμψης

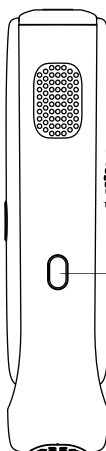

Κουμπί

ενεργοποίησης / λειτουργίας


Άνοιγμα
εισόδου

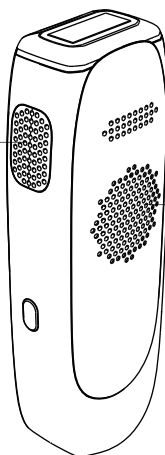


Αποχετευτική οπή

Επιφάνεια
εκπομπής φωτός

Διπλές λάμπες

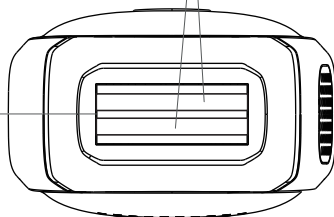

Εικονίδιο αυτόματης λάμπης
(Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λάμπης για αλλαγή)

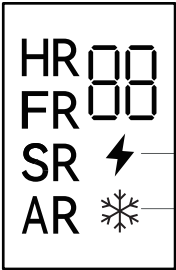

Διπλό κλικ στο κουμπί ενεργοποίησης για εναλλαγή λειτουργιών:

HR HR Αποτρίχωση HR (μονή λάμψη) t

FR FR Υπεραποτρίχωση FR (5 συνεχόμενες λάμπες)

SR SR Θεραπεία δέρματος SR (2 συνεχόμενες λάμπες)

AR Θεραπεία ακμής AR (μονή λάμψη)

Εικονίδιο σημείου ψύξης
(Διπλό κλικ στο κουμπί λάμπης για αλλαγή)

Τεχνικές προδιαγραφές

Ονομασία	Συσκευή αποτρίχωσης ANLAN Lumalce
Μοντέλο προϊόντος	T75S
Τάση εισόδου	AC100V - 240V
Τάση εξόδου	DC24V
Ρεύμα εξόδου	2,5A
Ισχύς εξόδου	60W
Πεδίο λάμπης (άνοιγμα ακτινοβολίας)	3,72cm ²
Ενέργεια λάμπης / J	Μονός παλμός, μέγιστο περίπου 20J Επόμενος παλμός, μέγιστο περίπου 26J
Μήκος κύματος φίλτρου	560-1200nm
Βάρος κύριας μονάδας	Περίπου 320g
Λειτουργία	4 λειτουργίες (HR / FR / SR / AR)
Διαστάσεις κύριας μονάδας	Περίπου 183 x 68 x 44 mm


Περιεχόμενα συσκευασίας



Κύρια συσκευή * 1




Τσάντα αποθήκευσης * 1

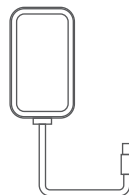


Αντάπτορας * 1



Γυαλιά προστασίας * 1

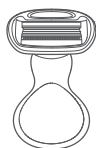

Ξυριστική μηχανή * 1

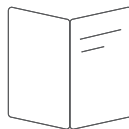

Οδηγίες χρήσης * 1



Πανί καθαρισμού * 1

Πεδίο εφαρμογής και διάρκεια χρήσης



Πατήστε μία φορά τον διακόπτη για να μεταβείτε από το επίπεδο 1 έως το 10.

Συνιστάται να ξεκινήσετε από το πρώτο επίπεδο κατά την πρώτη χρήση.


Μέρη σώματος	Χρόνος χρήσης	Κύκλοι χρήσης
Μασχάλες	2 λεπτά	Εβδομάδα 1-4: Χρησιμοποιήστε 2-3 φορές την εβδομάδα. Μετά την 4η εβδομάδα: Χρησιμοποιήστε 1-2 φορές την εβδομάδα.
Στήθος	5 λεπτά	
Κοιλιά	2 λεπτά	
Δάχτυλο	2 λεπτά	
Χέρια	2 λεπτά	
Πόδια	2 λεπτά	
Μηρός	2 λεπτά	
Πρόσωπο	2 λεπτά	
Γραμμή μικίνι	2 λεπτά	
Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε μετά από έκθεση στον ήλιο.		

Οδηγίες χρήσης

1. Ξύρισμα των τριχών. Αφαιρέστε τις τρίχες από την περιοχή που θα υποβληθεί σε θεραπεία.
2. Συνδέστε το φιλς τροφοδοσίας.

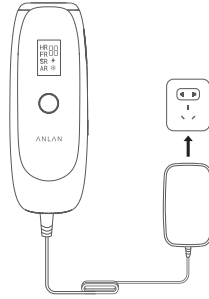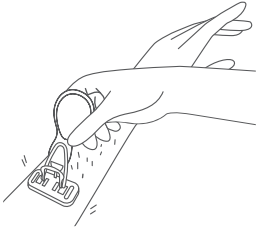


3. Βεβαιωθείτε ότι το φιλς είναι σωστά συνδεδεμένο κατά τη χρήση.
4. Φορέστε προστατευτικά γυαλιά για την προστασία των ματιών.

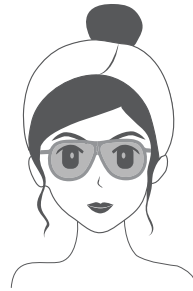


5. Ενεργοποίηση και επιλογή λειτουργίας.

- ① Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- ② Πατήστε μία φορά για ρύθμιση του επιπέδου έντασης, διπλό κλικ για αλλαγή λειτουργίας.

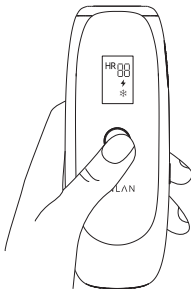

6. Τοποθέτηση της συσκευής. Κρατήστε τη συσκευή σε γωνία 90° προς το δέρμα και ξεκινήστε τη θεραπεία.

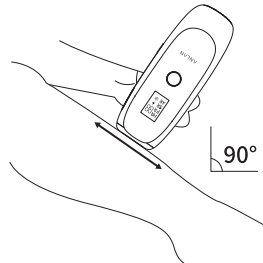

Λειτουργία	Χειροκίνητη ρύθμιση	Αυτόματη ρύθμιση
Μέρος σώματος	Μικρές επιφάνειες: δάχτυλα, γραμμή μπικίνι, πρόσωπο κ.ά.	Μεγάλες επιφάνειες: χέρια, μηροί , πλάτη κ.ά.
Κοιλιά	Προεπιλεγμένες τιμές κατά την εκκίνηση	Διπλό κλικ για προσαρμογή
Συχνότητα εκπομπής	Πατήστε μία φορά για το φως	Πατήστε μία φορά για το φως
Γωνία χρήσης	Καθετότητα προς το δέρμα (90°)	
Έξυπνη	Αυτόματη διακοπή μετά από 5 λεπτά αδράνειας	
Λειτουργία ψύξης	Ενεργοποιημένο από προεπιλογή. Διπλό πάτημα του κουμπιού «Φως» για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.	

Επιλέξτε λειτουργία εξόδου.

Με διπλό πάτημα του διακόπτη τροφοδοσίας/λειτουργίας μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ τεσσάρων λειτουργιών. Φοράτε γυαλιά για την προστασία των ματιών.

Μοντέλο εξόδου	Αριθμός εκπομπών	Ενέργεια	Λειτουργία	Ευαίσθητες περιοχές, ζώνη. Μπικίνι, λεπτές τρίχες.
Λειτουργία HR	Μονή εκπομπή	Ισχυρή έξοδος	Αποτρίχωση	Μεγάλες περιοχές, όπως πόδια, χέρια, παχιά τρίχα.
Λειτουργία FR	5 εκπομπές Διαδοχικά	Ολική ισχυρή έξοδος	Αποτρίχωση	Μεγάλες περιοχές, όπως πόδια, χέρια, πυκνά μαλλιά
Λειτουργία SR	2 ακτινοβολίες Διαδοχικά	Απαλή Ολική έξοδος και φροντίδα δέρματος	Αποτρίχωση	Ευαίσθητες περιοχές, ζώνη. Μπικίνι, λεπτά μαλλιά
Λειτουργία AR	Μονή εκπομπή	Απαλή έξοδος	Αποτρίχωση και φροντίδα δέρματος	Ευαίσθητες περιοχές, ζώνη. Μπικίνι, λεπτές τρίχες.

Προσοχή:

- Πρώτα απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και έπειτα αποσυνδέστε το βύσμα.
- Περιμένετε έως ότου η επιφάνεια φωτός κρυώσει πριν από τον καθαρισμό της (10 λεπτά μετά την απενεργοποίηση της τροφοδοσίας).
- Κατά την αποθήκευση της συσκευής, ο φορτιστής και η συσκευή πρέπει να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε πηγές φωτιάς.
- Κρατήστε το μακριά από τα παιδιά.
- Ενυδατώστε άμεσα το δέρμα σας μετά τη χρήση. Εάν αισθανθείτε ενόχληση, εφαρμόστε ψυχρή κομπρέσα για 30 έως 60 λεπτά.


Κατάλληλες τρίχες και αντίστοιχοι τόνοι δέρματος

Προειδοποίηση πριν από την εφαρμογή: Όσο πιο σκούρος είναι ο τόνος του δέρματος, τόσο λιγότερο κατάλληλη είναι η χρήση. Όσο πιο ανοιχτόχρωμα είναι τα μαλλιά, τόσο λιγότερο αποτελεσματική είναι η λειτουργία.

Τόνος δέρματος



Χρώμα τριχών

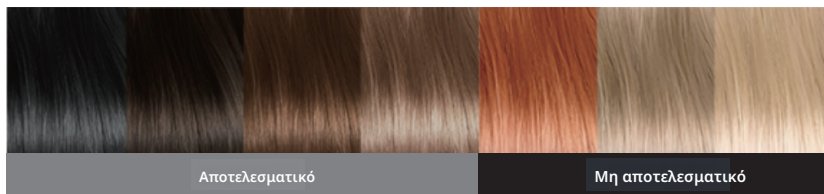

Κανόνες ασφάλειας πριν και μετά τη χρήση – Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση

- Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα του δέρματος και των τριχών σας βρίσκεται εντός του επιτρεπτού φάσματος.
- Εκτελέστε πρώτα δοκιμή στο μπράτσο, ξεκινώντας από το επίπεδο 1.
- Η επιφάνεια του δέρματος δεν πρέπει να έχει υπολείμματα αρωμάτων, γαλακτώματος σώματος, λοσιόν ή άλλων προϊόντων.
- Διατηρείτε το δέρμα στεγνό.
- Στην έξοδο φωτός δεν πρέπει να υπάρχουν τρίχες, σκόνη ή άλλα ξένα σώματα.
Σημειώσεις μετά τη χρήση:
- Ενυδατώστε το δέρμα εγκαίρως ή εφαρμόστε πάγο.
- Μην χρησιμοποιείτε αρώματα ή προϊόντα περιποίησης δέρματος που περιέχουν σωματίδια.
- Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο για 48 ώρες. Εάν είναι απαραίτητο, εφαρμόστε αντηλιακή κρέμα προστασίας και χρησιμοποιήστε μέσα αντηλιακής προστασίας.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που ακολουθεί μετά από έκθεση στον ήλιο.
- Μην χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια αισθητικής επέμβασης.
- Εάν αισθανθείτε ενόχληση, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε ιατρό ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Μέθοδοι συντήρησης και φροντίδας του προϊόντος

- Καθαρίζετε με μαλακό, στεγνό πανί. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση νωπού πανιού και η είσοδος υγρών στη συσκευή.
- Απαγορεύεται αυστηρά η επαφή με νερό ώστε να αποφευχθούν βραχυκυκλώματα ή διαρροές, που μπορεί να επηρεάσουν την προσωπική ασφάλεια.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από την πρόσβαση των παιδιών.
- Απαγορεύεται ρητά η αποστείρωση σε υψηλές θερμοκρασίες.

Κατάσταση αποθήκευσης

- Περιβάλλον αποθήκευσης: Ξηρός και καλά αεριζόμενος χώρος.
- Κατά την αποθήκευση, τοποθετήστε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία· το καλώδιο φόρτισης και η συσκευή πρέπει να αποθηκεύονται ξεχωριστά. Το καλώδιο φόρτισης δεν πρέπει να μπλέκεται με τη συσκευή.
- Απαγορεύονται αυστηρά οι κρούσεις, καθώς επιβαρύνουν τη σταθερότητα των εσωτερικών εξαρτημάτων και μπορεί να προκαλέσουν βλάβες.

Ανάλυση κοινών βλαβών και αντιμετώπιση προβλημάτων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μη αποσυναρμολογείτε τη συσκευή μόνοι σας.

Σύμπτωμα	Πιθανή αιτία	Λύση
Έλλειψη εμφάνισης	1. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι σωστά συνδεδεμένο 2. Το πλήκτρο λειτουργίας πατήθηκε για λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα	1. Επιβεβαιώστε ξανά και συνδέστε σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας 2. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο.
Αδυναμία ενεργοποίησης	1. Αδύναμη επαφή τροφοδοσίας	1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο.
Αδυναμία εκπομπής λάμψης	Το παράθυρο εκπομπής φωτός δεν έχει επαφή με το δέρμα ή δεν είναι κάθετο σε αυτό Ο αριθμός των λάμψεων από την κεφαλή φωτός έχει εξαντληθεί Η φόρτιση δεν έχει ολοκληρωθεί	1. Πατήστε το κουμπί αφού η κεφαλή φωτός έρθει σε επαφή με το δέρμα και είναι κάθετη σε αυτό. 2. Περιμένετε μέχρι να αρχίσει να αναβοβρόχνη ο ενδεικτής ετοιμότητας πριν πατήσετε το κουμπί.
Αυτόματη απενεργοποίηση	Το σύστημα έχει ρυθμιστεί να απενεργοποιείται αυτόματα εάν δεν υπάρξει λάμψη εντός 5 λεπτών	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Ενεργοποίηση» για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, προσδιορίστε την πιθανή αιτία βάσει των συμπτωμάτων και λάβετε τα κατάλληλα μέτρα. Εάν η βλάβη δεν μπορεί να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείπει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο προϊόν:

- Χρησιμοποιήστε τα προϊόντα μόνο για τον προορισμό τους.
- Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε κατεστραμμένο, ερεθισμένο ή καμένο δέρμα.
- Για τις συσκευές αποτρίχωσης IPL, αποφύγετε τη χρήση τους σε μαυρισμένο δέρμα για να αποφύγετε τον αποχρωματισμό και τον ερεθισμό.
- Οι ηλεκτρικές βούρτσες και οι τρίφτες πρέπει να καθαρίζονται τακτικά και να ελέγχονται για μηχανικές βλάβες, όπως ρωγμές ή φθαρμένες κεφαλές.
- Μην βυθίζετε τις ηλεκτρικές συσκευές στο νερό, εκτός εάν ο κατασκευαστής τις έχει χαρακτηρίσει ως αδιάβροχες.
- Μην αφήνετε τις συσκευές σε υγρό περιβάλλον εάν δεν έχουν σχεδιαστεί για τέτοια χρήση.

Κίνδυνοι για τον χρήστη:

- Οι αποτριχωτήρες IPL μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό του δέρματος εάν χρησιμοποιηθούν εσφαλμένα. Πριν από την πρώτη χρήση, πραγματοποιήστε μια δοκιμή σε μια μικρή περιοχή του δέρματος.
- Οι συσκευές EMS (ηλεκτρικοί μασέρ) δεν είναι κατάλληλες για άτομα με βηματοδότες, έγκυες γυναίκες ή άτομα με δερματικές παθήσεις.

- Τα ηλεκτρικά μασάζ φτέρνας πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε στεγνό δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με ανοιχτές πληγές.
- Αποφύγετε τη χρήση συσκευών θέρμανσης σε ευαίσθητες περιοχές του σώματος για την αποφυγή εγκαυμάτων.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα:

- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικούς φορτιστές και εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας και οι μπαταρίες είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας πριν από κάθε χρήση.
- Σταματήστε αμέσως τη χρήση εάν παρατηρήσετε ζημιά στα καλώδια ή την μπαταρία.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

- Τα αποτριχωτικά IPL πρέπει να χρησιμοποιούνται σε καθαρό και στεγνό δέρμα, αποφεύγοντας τις ευαίσθητες περιοχές, όπως η περιοχή των ματιών. Η τακτικότητα των θεραπειών εξασφαλίζει τα καλύτερα αποτελέσματα.
- Πλένετε τις άκρες της βούρτσας μασάζ σώματος μετά από κάθε χρήση για να αποφύγετε τη δημιουργία βακτηρίων. Ρυθμίστε την ένταση του μασάζ ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες του δέρματός σας.
- Χρησιμοποιείτε τα ανταλλακτικά λειαντικά συστατικά των τρίψεων φτέρνας και των κοπών σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Καθαρίζετε τη συσκευή από τυχόν εναπομείναντα νεκρά δέρματα μετά από κάθε χρήση.
- Για τις συσκευές EMS, τοποθετήστε τα ηλεκτρόδια μόνο σε καθαρό και στεγνό δέρμα, αποφεύγοντας τις ευαίσθητες περιοχές και τις ανοιχτές πληγές.

Συντήρηση και αποθήκευση

- Καθαρίζετε τις συσκευές τακτικά μετά από κάθε χρήση, χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί ή ειδικά προϊόντα καθαρισμού.
- Αποθηκεύστε τις συσκευές σε ξηρό μέρος, αποφεύγοντας τις ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως.
- Απενεργοποιείτε τις συσκευές με μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μετά τη χρήση και επαναφορτίζετε σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Προσαρμογή στον χρήστη:

- Παρατηρείτε τακτικά την αντίδραση του δέρματος στη χρήση των συσκευών. Σε περίπτωση ερεθισμού ή ερυθρότητας, διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε έναν δερματολόγο.
- Επιλέξτε ρυθμίσεις έντασης και λειτουργίες κατάλληλες για τον τύπο του δέρματός σας και το επίπεδο ευαισθησίας.

- Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε συσκευές που θερμαίνουν ή λειτουργούν σε υψηλές εντάσεις, ειδικά αν έχετε κάποια δερματική πάθηση ή πρόβλημα υγείας.

Βλάβες και σέρβις:

- Εάν παρατηρήσετε διαρροές, προβλήματα λειτουργίας, ηλεκτρικές εκκενώσεις ή άλλες βλάβες, σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή για επισκευές και αντικατάσταση εξαρτημάτων.
- Μην τροποποιείτε μόνοι σας τον εξοπλισμό, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ασφάλειά του και να ακυρώσει την εγγύηση.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ασφάλεια λειτουργίας, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ανθεκτικότητα των υλικών.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφαλείας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

Shenzhen ANLAN Life Technology Co., Ltd
2204.Bldg.4, Cloud Park Phase 2, BanTianSt. /
518129 Longgang, Shenzhen, Guangdong, Κίνα
support@anlan.com

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

LTI Testing & Certification France S.A.S.
Rue de Rome 154
13006 Marseille, Γαλλία
info@lti-lab.com