



Ηλεκτρονική Ζυγαριά για Βρέφη

Οδηγίες Χρήσης

Model: B12H



Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν. Για να διασφαλίσετε την ακρίβεια της ζυγαριάς και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής, παρακαλούμε να τηρείτε τους κανόνες χρήσης. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και να τις διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά.

ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Σας ευχαριστούμε θερμά για την αγορά από εμάς και την εμπιστοσύνη που δείξατε στην εταιρεία μας.

GROWNSY – ο καλύτερος βοηθός των γονέων.

Η GROWNSY δημιουργεί σύγχρονα και μελετημένα προϊόντα για βρέφη, υποστηρίζοντας την γονεϊκότητα. Ξεκινώντας από έξυπνα βασικά είδη σίτισης, η GROWNSY προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες γονέων και παιδιών. Είμαστε αφοσιωμένοι στην οικοδόμηση μιας ολοκληρωμένης μάρκας στην αγορά προϊόντων για μητέρες και βρέφη.

Με βασική ιδέα το «δημιουργούμε τέλεια προϊόντα που εκφράζουν αγάπη και φροντίδα», η GROWNSY επικεντρώνεται στην επίλυση των πιο απαιτητικών παραγωγικών προβλημάτων και προσφέρει στους χρήστες μας μέγιστη άνεση. Τα προϊόντα GROWNSY ξεχωρίζουν για τον σύγχρονο σχεδιασμό, τη δημιουργική κατασκευή και την έξυπνη χρήση.

Σε περίπτωση ερωτήσεων ή προβλημάτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω email:

service@grownsy.com

Ή στείλτε SMS με το κείμενο GROWNSY στον αριθμό (833)524-0498.

Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να επιλύσουμε κάθε πρόβλημα του πελάτη εντός 24ωρών.



Randell
Ιδρυτής της GROWNSY

Λειτουργίες

1. Αυτή η ζυγαριά είναι κατασκευασμένη από φιλικό προς το περιβάλλον πλαστικό.
 2. Ενσωματωμένος υψηλής ακρίβειας αισθητήρας και ολοκληρωμένα κυκλώματα.
 3. Λευκή ψηφιακή οθόνη LCD, που διευκολύνει τη χρήση στο σκοτάδι.
 4. Κουμπί αφής, αυτόματη απενεργοποίηση.
 5. Ενδείκτης χαμηλής στάθμης μπαταρίας και υπερφόρτωσης.
 6. Λειτουργία μετατροπής μονάδων, κλειδώματος και μηδενισμού/ζύγισης με ταρίφα.
 7. Η κάτω πλευρά διαθέτει αντιστοίχιστα ελαστικά ποδαράκια που αποτρέπουν τη μετακίνηση της ζυγαριάς.
 8. Εξοπλισμένη με μέτρο 69 cm / 27 ιντσών, το οποίο διευκολύνει τη μέτρηση του ύψους του παιδιού.
 9. Το μέγιστο εύρος ζύγισης είναι 150 kg, επιτρέποντας τη χρήση της ζυγαριάς για βρέφη, παιδιά και ενήλικες.
- Μπορούν να επιλεγούν έως 10,5 μονάδες: lb oz, g, kg, lb, oz.

Προδιαγραφές

Διαστάσεις προϊόντος: 27,56 × 13,39 × 2,28 ίντσες (700 × 340 × 58 mm)
Τροφοδοσία : 3 * μπαταρία AAA 1,5V
Εύρος : 0,1:1 lb:oz - 330,7:5291,1 lb:oz (30g - 150kg)
Βήμα αύξησης: 0,18 oz (5 g)
Μονάδες: lb oz, g, kg, lb, oz
Καθαρό βάρος προϊόντος: 3,97 lbs (1,80 kg)
Κύρια υλικά: ABS + σιλικόνη + ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Στοιχεία (PCB, αντιστάτης, πυκνωτής, ολοκληρωμένο κύκλωμα)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2σε1

1. Χρήση ως ζυγαριά σώματος - χωρίς δίσκο



2. Χρήση ως ζυγαριά για βρέφη και ζώα - με δίσκο



Επεξήγηση οθόνης



"ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ": σύντομο πάτημα για ενεργοποίηση , Πατήστε παρατεταμένα, για να απενεργοποιηστεί.


"ΚΟΥΜΠΙ ΤΑΡΑ": σύντομο πάτημα για μηδενισμό/αφαίρεση tara (Όταν η ζυγαριά είναι ενεργοποιημένη)

"ΚΟΥΜΠΙ ΜΟΝΑΔΑ": σύντομο πάτημα για επιλογή 5 μονάδων: lb oz, g, oz, lb.

"ΚΟΥΜΠΙ ΠΑΥΣΗΣ": σύντομο πάτημα για κλείδωμα δεδομένων




Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης

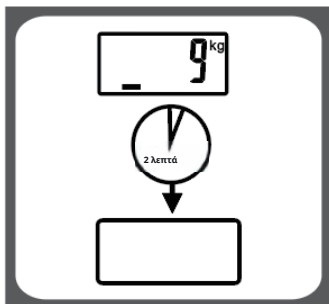


Το προϊόν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας, εάν για περίπου 2 λεπτά δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία και τα δεδομένα παραμένουν. Δεν θα πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια και τα δεδομένα θα παραμείνουν. Θα σταθούν σταθερές και αμετάβλητες.

Πώς να εγκαταστήσετε;


Βήμα 1: τοποθετήστε το δίσκο.

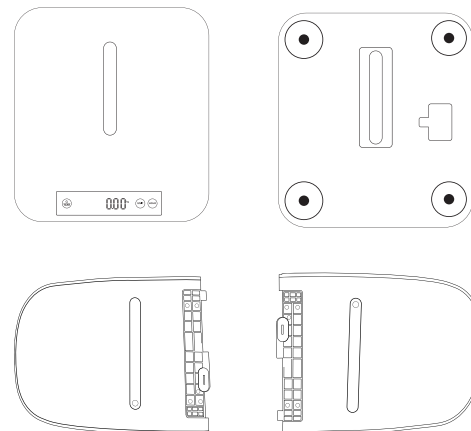

Βήμα 2: Τοποθετήστε τη δίσκο μέσα στη βάση

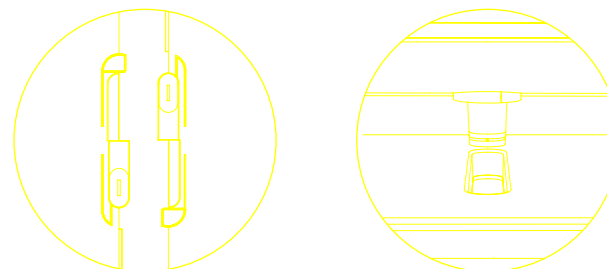



Βήμα 3: Κλειδώστε το δίσκο με τους περιστροφικούς μηχανισμούς ασφάλισης.

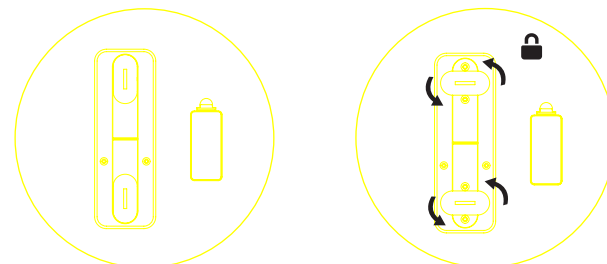

Τοποθέτηση μπαταρίας

Η μπαταρία είναι τυλιγμένη με στρώμα μονωτικής πλαστικής μεμβράνης. Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε αφαιρέστε τη διαφανή μεμβράνη.

Παρακαλούμε προσέξτε τη σωστή τοποθέτηση των θετικών και αρνητικών πόλων της μπαταρίας.

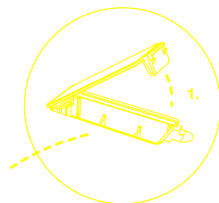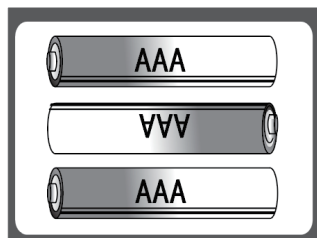

● ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Όταν στην οθόνη LCD (E) η φωτεινότητα εξαφανιστεί, σημαίνει ότι οι μπαταρίες είναι εξαντλημένες και πρέπει να αντικατασταθούν.
- Εάν η ζυγαριά δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να αφαιρεθούν οι μπαταρίες.
- Οι άδεις μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλο δοχείο ανακύκλωσης.

Υπερφόρτωση και χαμηλή τάση μπαταρίας

1. Όταν στην οθόνη LED εμφανιστεί «Err», σημαίνει ότι το βάρος υπερβαίνει τη μέγιστη χωρητικότητα των 150 kg. Παρακαλούμε διακόψτε τη ζύγιση ή μειώστε το βάρος για να αποφύγετε βλάβη στον αισθητήρα.

2. Όταν στην οθόνη LED εμφανιστεί η ένδειξη "Lo", σημαίνει ότι η μπαταρία είναι χαμηλή. Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας. Παρακαλώ αντικαταστήστε με 3 νέες μπαταρίες AAA.



Οδηγίες Χρήσης

1. Μετά την εγκατάσταση των μπαταριών, τοποθετήστε τη ζυγαριά σε επίπεδη, ομοιόμορφη και σταθερή επιφάνεια. Μην αγγίζετε άλλα αντικείμενα γύρω από τη ζυγαριά βρεφών, ώστε να εξασφαλίσετε ακριβή μέτρηση.

2. Πατήστε σύντομα το «ON / OFF» για να ενεργοποιήσετε τη ζυγαριά. Οι ενδείξεις της ζυγαριάς εμφανίζονται σε βήματα των 5 g.


3. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη «0000», η ζυγαριά είναι έτοιμη προς χρήση. Πατήστε σύντομα το «UNIT» για να επιλέξετε την επιθυμητή μονάδα.



4. Τοποθετήστε προσεκτικά το παιδί στη ζυγαριά, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο κεφαλάκι του. Περιμένετε μέχρι η ζυγαριά να σταθεροποιηθεί και να κλειδώσει αυτόματα.

Σημείωση: εάν δεν επιθυμείτε να τοποθετήσετε το παιδί απευθείας στην επιφάνεια της ζυγαριάς και προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε πετσέτα ή κουβέρτα, τοποθετήστε πρώτα την πετσέτα/κουβέρτα και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί , πατήστε Tare για να μηδενίσετε την οθόνη, πριν τοποθετήσετε το παιδί στη ζυγαριά.

Προσοχή: Μετά τον αυτόματο κλειδωμά των δεδομένων από τη ζυγαριά (λειτουργία HOLD), η ένδειξη δεν θα αλλάξει, ακόμα κι αν προστεθεί επιπλέον βάρος στη ζυγαριά. Αυτό συμβαίνει διότι τα δεδομένα έχουν κλειδωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε το πλήκτρο «TARE» για να διαγράψετε τα δεδομένα και να χρησιμοποιήσετε εκ νέου τη ζυγαριά.

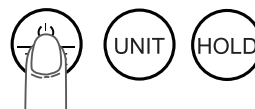

Ζυγαριά παιδιού



Μετά το TARE

5. Προσοχή:

Αυτή η ζυγαριά διαθέτει τόσο αυτόματη όσο και χειροκίνητη λειτουργία «HOLD». Η αυτόματη λειτουργία HOLD εμφανίζει το βάρος όταν αυτό έχει σταθεροποιηθεί επαρκώς ώστε να δοθεί ακριβής ένδειξη.

Εάν το παιδί κινείται υπερβολικά, η αυτόματη λειτουργία HOLD δεν θα ενεργοποιηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε το κουμπί HOLD όταν το παιδί είναι όσο το δυνατόν πιο ήρεμο.

Θα εμφανιστεί η ένδειξη «HOLD» και θα εμφανιστεί το βάρος. Μετά την απομάκρυνση του παιδιού, τα εμφανιζόμενα δεδομένα δεν θα επανέλθουν στο μηδέν και θα παραμείνουν αποθηκευμένα.

Προσοχή : Εάν θέλετε να ζυγίσετε ξανά αυτή τη στιγμή, τοποθετήστε το παιδί ξανά και πατήστε σύντομα το «TARE» για να μηδενίσετε τη ζυγαριά και να ξεκινήσετε ξανά τη διαδικασία ζύγισης.

HOLD

9. 7.0 lb:oz



Μέτρα προφύλαξης

α. Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε οριζόντιο τραπέζι και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την. Ροή αέρα δεν πρέπει να είναι πολύ ισχυρός. Μετά την εμφάνιση του «0» στην οθόνη, τοποθετήστε το αντικείμενο και πραγματοποιήστε τη ζύγιση.

β. Κατά τη ζύγιση, βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα του μωρού βρίσκονται στη θήκη και μην επιτρέπεται να ακουμπούν στο τραπέζι ή στο πάτωμα, διότι αυτό θα προκαλέσει ανακριβή αποτελέσματα.

γ. Βεβαιωθείτε ότι η ζυγαριά δεν έρχεται σε επαφή με άλλα αντικείμενα γύρω της, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια της ζύγισης.

δ. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η μπαταρία είναι εγκατεστημένη και σωστά τοποθετημένη.

ε. Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε σκληρή, επίπεδη, οριζόντια και σταθερή επιφάνεια (μαλακές επιφάνειες, όπως χαλιά, ενδέχεται να επηρεάσουν την ακρίβεια της ζύγισης). Βεβαιωθείτε ότι και τα τέσσερα πόδια της ζυγαριάς δεν βρίσκονται σε σχισμές του δαπέδου. Η άνιση τοποθέτηση των τεσσάρων γωνιών επηρεάζει την ακρίβεια της ζύγισης.

ς. Αποθηκεύετε σε ξηρό μέρος, μην τη χρησιμοποιείτε σε σημεία με υγρασία. Δεν πρέπει να ξεπλένεται με νερό εκτός από την επιφάνεια του δίσκου.

ζ. Η ζυγαριά είναι μια ακριβής ηλεκτρονική συσκευή ζύγισης, που πρέπει να φυλάσσεται προσεκτικά και να χρησιμοποιείται σωστά. Αποφεύγετε την υγρασία, τις πτώσεις, την έντονη πίεση καθώς και την έκθεση στον ήλιο. Μην ξεπλένετε απευθείας με νερό εκτός από τον δίσκο. Εάν η επιφάνεια είναι λερωμένη, παρακαλούμε να την καθαρίσετε με ένα μαλακό πανί. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση βενζίνης, νιτροδιαλυτών και υγρών αλκαλίων για τον καθαρισμό.

η. Εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να αφαιρεθεί η μπαταρία και να αποθηκευτεί σε δροσερό και ξηρό μέρος.

θ. Κατά τη μεταφορά και τη μετακίνηση, να είστε προσεκτικοί ώστε να αποφευχθεί η πτώση και η ζημιά στους τέσσερις αισθητήρες στο κάτω μέρος.

ι. Οι κραδασμοί, η ροή αέρα και οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη σταθερότητα και την ακρίβεια της συσκευής.

κ. Τα δεδομένα ενδέχεται να είναι ανακριβή όταν η ουρά του ζώου ακουμπά το πάτωμα.

λ. Το βρέφος πίνει πολύ λίγο γάλα, ενώ ο οργανισμός καταναλώνει ενέργεια, επομένως τα δεδομένα μπορεί να παραμένουν σχετικά σταθερά.

μ. Η αυτόματη τιμή κλειδώματος μπορεί να ποικίλει κάθε φορά, και ο μέσος όρος τριών μετρήσεων είναι σχετικά ακριβής.

FAQ

1) Ε: Δεν ανάβει.

A: Παρακαλούμε ελέγξτε αν η μπαταρία είναι τοποθετημένη. Κατά την παραλαβή του προϊόντος, η μπαταρία είναι τυλιγμένη με μια στρώση διαφανούς μονωτικής πλαστικής μεμβράνης. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η μονωτική μεμβράνη έχει αφαιρεθεί.
Εάν η συσκευή δεν ενεργοποιείται κατά τη χρήση, παρακαλούμε ελέγξτε αν η μπαταρία είναι χαλαρή.

2) Ε: Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της λειτουργίας ταρίσματος (TARE). A: Παρακαλούμε αφαιρέστε την μπαταρία, τοποθετήστε την ξανά και ελέγξτε αν το πρόβλημα έχει επιλυθεί.
; Ελέγξτε αν υπάρχουν εμπόδια στις τέσσερις γωνίες της ζυγαριάς και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε σκληρή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

3) Ε: Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα χρήσης, η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται.

A: Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα χρήσης, η ισχύς της μπαταρίας μειώνεται, προκαλώντας μείωση της φωτεινότητας της οθόνης. Μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "LO" στην οθόνη, μπορείτε να συνεχίσετε τη χρήση, ωστόσο είναι απαραίτητη η όσο το δυνατόν ταχύτερη αντικατάσταση της μπαταρίας με καινούρια.

4) Ερώτηση: Τα αποτελέσματα της ζύγισης είναι ανακριβή και ανομοιόμορφα.

Απάντηση: Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που μπορεί να επηρεάζουν την ακρίβεια και την επαναληψιμότητα των μετρήσεων:

1. Βεβαιωθείτε ότι το παιδί τοποθετείται πάντα στην ίδια θέση.
Η διαφορετική θέση επηρεάζει την ακρίβεια της μέτρησης.

2. Βεβαιωθείτε ότι το παιδί παραμένει όσο το δυνατόν ακίνητο, για να ληφθούν σταθερά δεδομένα.
Οι κινήσεις του παιδιού επηρεάζουν την ακρίβεια της μέτρησης.

3. Βεβαιωθείτε ότι η ζυγαριά δεν περιβάλλεται από άλλα αντικείμενα και ότι δεν αγγίζεται κατά τη διάρκεια ζύγισης.

4. Η αύξηση βάρους είναι 5 g, ενώ το εύρος ανοχής σφάλματος είναι $\pm 50-300$ g.
Όσο τα δεδομένα βρίσκονται εντός του εύρους σφάλματος, είναι ακριβή και δεν επηρεάζουν τη σωστή χρήση.

5. Βεβαιωθείτε ότι η ζυγαριά βρίσκεται σε σκληρή, επίπεδη επιφάνεια (τοποθετήστε τα χέρια σας στα δύο άκρα της τάβλας και πιέστε για να ελέγξετε τη σταθερότητα) και μην τη χρησιμοποιείτε σε χαλί.

6. Πριν από κάθε ζύγιση πρέπει να γίνει μηδενισμός (τάρα).

7. Κατά τη διάρκεια της ζύγισης μπορεί να εμφανιστεί σφάλμα μέτρησης.

8. Τα ρούχα του παιδιού δεν πρέπει να προεξέχουν εκτός της τάβλας ούτε να ακουμπούν στο τραπέζι ή στο πάτωμα, καθώς αυτό επηρεάζει την ακρίβεια της μέτρησης.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η GROWNSY αποσκοπεί στη δημιουργία φιλικών προς τον χρήστη προϊόντων, που προορίζονται για νεογνά και οικιακή χρήση. Στόχος μας δεν είναι μόνο η δημιουργία ενός προϊόντος, αλλά και ενός αντικειμένου γεμάτου στοργή, την οποία μεταδίδουμε στους πελάτες μας. Εάν προκύψουν οποιαδήποτε προβλήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας (**service@grownsy.com**) – θα χαρούμε να βοηθήσουμε.

Ή στείλτε SMS με το κείμενο GROWNSY στον αριθμό **(833)524-0498**.



ΚΑΝΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ

Στην **GROWNSY** χρησιμοποιούμε μόνο προϊόντα υψηλής ποιότητας τυπική – ωστόσο, παρακαλούμε μην ξεχάσετε να εγγραφείτε και να λάβετε δωρεάν ετήσια εγγύηση για κάθε ενδεχόμενο ...

www.grownsy.com/warranty



Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο προϊόν:

- Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια για να αποφύγετε τη μετακίνηση ή την πτώση της συσκευής.
- Μην πηδάτε ή στέκεστε πάνω στη ζυγαριά με απότομο τρόπο για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιών στους αισθητήρες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με υψηλή υγρασία, όπως μπάνια με ατμό, εάν το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί για αυτό.
- Αποφύγετε τη βύθιση της συσκευής σε νερό και την επαφή με άλλα υγρά, ώστε να μην επηρεαστεί αρνητικά η απόδοσή της.

Κίνδυνος για τον χρήστη:

- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για άτομα που χρησιμοποιούν ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες, λόγω της χρήσης της τεχνολογίας βιοϊμπενζέτας.
- Οι ζυγαριές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από έγκυες γυναίκες ή παιδιά, εκτός εάν ο κατασκευαστής έχει δώσει ειδικές οδηγίες για το αντίθετο.
- Σε περίπτωση ορατής βλάβης στη συσκευή (π.χ. ρωγμές, εκτεθειμένα καλώδια), διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το σέρβις.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

- Αφαιρέστε τα παπούτσια και τις κάλτσες πριν από τη χρήση για να διασφαλίσετε την ακριβή μέτρηση της βιοαντίστασης.
- Πραγματοποιήστε τη ζύγιση σε σκληρή, επίπεδη επιφάνεια - αποφύγετε τη χρήση της ζυγαριάς σε χαλιά ή σε ασταθές έδαφος.
- Συγχρονίζετε τακτικά τα δεδομένα με την εφαρμογή του κινητού σας για να παρακολουθείτε την πρόοδο της υγείας και της φυσικής σας κατάστασης.
- Αποφύγετε τη χρήση της ζυγαριάς αμέσως μετά την άσκηση, την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων υγρών ή γευμάτων για να έχετε ακριβή αποτελέσματα.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Καθαρίστε τη μονάδα με ένα στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί - μην χρησιμοποιείτε χημικά.
- Αποθηκεύστε τη ζυγαριά σε στεγνό μέρος, προστατεύοντάς την από ακραίες θερμοκρασίες και υγρασία.
- Αντικαθιστάτε τακτικά τις μπαταρίες (κατά περίπτωση) ή φορτίζετε τη μονάδα σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Προσαρμογή στον χρήστη:

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι οι λειτουργίες της είναι κατάλληλες για τις ανάγκες της υγείας σας.
- Για παιδιά ή ηλικιωμένους, συνιστάται η χρήση της συσκευής υπό την επίβλεψη ενηλίκων.

Βλάβες και σέρβις:

- Εάν διαπιστωθεί μηχανική βλάβη (π.χ. θραύση γυαλιού), διακόψτε τη χρήση της συσκευής και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ασφάλεια λειτουργίας, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ανθεκτικότητα των υλικών.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

DORABOX CO., LIMITED

SHOP 185 G/F HANG WAI IND CTR NO 6 KIN TAI ST TUEN MUN NT HONG KONG

00000 Hong Kong, CN

xiao@grownsy.com

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

CET Product Service Sp z o.o.

Długa 33

95-100 Zgierz, PL

info@cetproduct.com